

## ディスプレイの見方



ムダ毛ケアを行う前に、肌色検知を行う必要があります。本製品は安全装置により、機器が肌を検知していない状態では照射できません。  
 ①肌センサーを肌にしっかり当ててください。肌センサーを肌に対して垂直にし、肌センサー全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。  
 ②肌が正しく検知されると、本体内部のファンが「ブーン」と周りはじめ、照射ができるようになります。(故障ではありません)  
 指示ランプの赤色 LED が消灯し、液晶ディスプレイに推奨の照射強度を点灯します。

# STELLA

## BEAUTE

### 毛周期に合わせたお手入れ頻度の目安

ムダ毛ケアモード		
使用する部位	最初の 2 カ月	→ 3 カ月目以降
ボディ	1 週間に 1 度	2 週間に 1 度
VIO ゾーン	2 週間に 1 度	4～8 週間に 1 度
フェイス (女性)	2 週間に 1 度	4～8 週間に 1 度
ヒゲ (男性)	3 日に 1 度	

美肌ケアモード・アクネケアモード	
顔 (男性・女性)	3 日に 1 度


- 使い始めや久しぶりにご使用いただく場合は、最初の 2 カ月と同じお手入れ頻度をオススメします。
- 一度お手入れをした後は、次の照射まで最低 2 日空けてください。過度のお手入れは肌トラブルの原因となります。
- 同じ部位にてムダ毛ケアモード、美肌ケアモード、アクネケアモードを同時に使用しないでください。同じ部位に他のモードを使用する場合、最低 2 日空けてご使用ください。

# STELLA

## BEAUTE

IPL光美容器 簡単使い方ガイド

### ムダ毛ケアモードの使い方

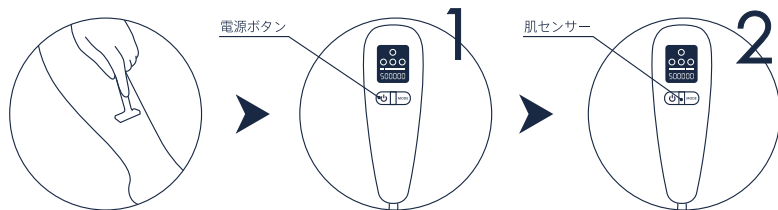

#### 準備

シェーバーや安全カミソリで事前に除毛します。毛の長さは1mm以下にしてください。


#### 電源 ON

電源コードをつなぎ、電源ボタンを2秒間長押しで電源 ON。

#### 肌色検知

使用前に肌センサーで肌の色を検知します。肌がセンサー全体を覆うようにしっかりと当ててください。正しく検知されると、内部のファンが起動し、照射できるようになります。

※本体を起動するたびに肌色検知が必要です。

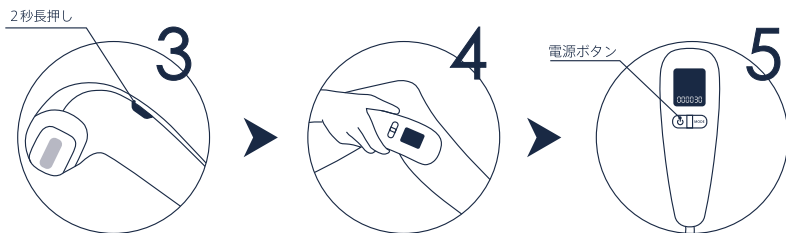

#### オート/マニュアル照射モード切り替え

肌色検知後はマニュアル照射モードになっています。側面にある照射ボタンを2秒間長押しすると、スピーディーなケアが可能なオート照射モードに切り替わります。

#### 照射レベル

肌センサーの検知結果に応じて、自動で照射レベルを調整するので、ムダ毛を処理したい箇所に照射面をしっかりと当て、照射ボタンを押して照射していきます。

※視界に入る照射光が苦手な方は、サングラスの着用をおすすめします。

※肌色検知結果に応じて、自動で照射レベルを調整します。そのほか電源ボタンを1回押すと、照射レベル1~9までお好みで調整できます。

#### 電源 OFF

使用後は電源ボタンを長押しして電源を OFF。30秒間のクールダウン後、停止します。

※液晶ディスプレイの30秒カウントダウンは本体を冷却するための設定です。そのままお待ちください。

#### 使い方ガイド




**注意**

目の周りや、肌の色が濃い箇所、ホクロや傷、刺青には照射しないでください。やけどのおそれがあります。

### お手入れできる部位と使用時間の目安

※使用時間や照射回数はあくまで目安となります  
※本製品は男性でもお使いいただけます

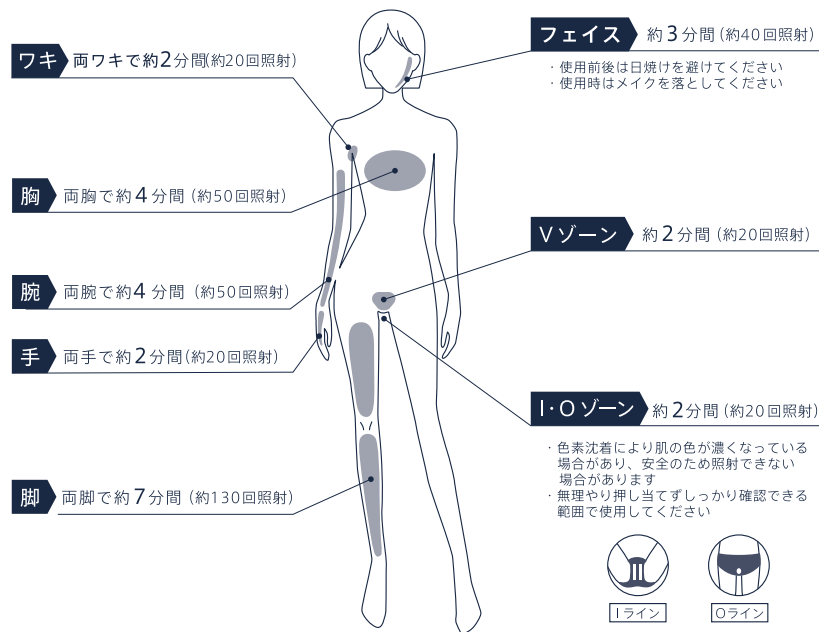


### 初めてのご使用時やしばらく使用しなかった場合

#### ■パッチテスト (皮膚試験)

初めて使用するときや、しばらく使用せず久しぶりにご使用になる場合、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。



電源を ON にし肌色検知した後、電源ボタンを押すたびに照射レベルが切り替わるので、照射レベル1からテストをしてください。

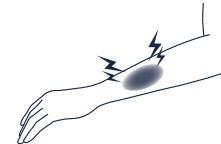

肌に強い痛みや、赤くなった状態が2日以上続く場合は使用を中止してください。

### 美肌ケアモード、アクネケアモードの使い方

電源を入れ、肌色検知をした後、モード切替ボタンを押すと、美肌ケア (SR) モード、アクネケア (AC) モードに切り替えることができます。詳細は、取扱説明書をご覧ください。