

## ディスプレイの見方



ムダ毛ケアを行う前に、肌色検知を行う必要があります。

本製品はセーフティ機能搭載のため、機器が肌を検知していない状態では照射できません。

- ① 肌色検知センサーを肌にしっかり当ててください。  
センサーを肌に対して垂直にし、センサー全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。
- ② 肌が正しく検知されると、本体内部のファンが「ブーン」と周りはじめ（故障ではありません）、照射ができるようになります。  
指示ランプの赤色 LED が消灯し、液晶ディスプレイに推奨の照射強度を点灯します。

# STELLA

## BEAUTE

### 毛周期に合わせたお手入れ頻度の目安

脱毛モード（ムダ毛ケア）		
使用する部位	最初の 2 カ月	→ 3 カ月目以降
ボディ	1 週間に 1 度	2 週間に 1 度
VIO ゾーン	2 週間に 1 度	4～8 週間に 1 度
フェイス（女性）	2 週間に 1 度	4～8 週間に 1 度
ヒゲ（男性）	3 日に 1 度	

美肌ケアモード・アクネケアモード（美肌ケア）	
顔（男性・女性）	3 日に 1 度

- 使い始めや久しぶりにご使用いただく場合は、最初の 2 カ月と同じお手入れ頻度をオススメします。
- 一度お手入れをした後は、次の照射まで最低 2 日空けてください。  
過度のお手入れは肌トラブルの原因となります。
- 同じ部位にてムダ毛ケアモード、美肌ケアモード、アクネケアモードを同時に使用しないでください。  
同じ部位に他のモードを使用する場合、最低 2 日空けてご使用ください。

# STELLA

BEAUTE

## IPL光美容器 簡単使い方ガイド

使い方ガイド



**注意** 目の周りや、肌の色が濃い箇所、ホクロや傷、刺青には照射しないでください。やけどのおそれがあります。


### 初めてのご使用時やしばらく使用しなかった場合

#### ■パッチテスト（皮膚試験）

初めて使用するときや、しばらく使用せず久しぶりにご使用になる場合、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。




電源を ON にし肌色検知した後、電源ボタンを押すたびに照射レベルが切り替わるので、照射レベル 1 からテストをしてください。

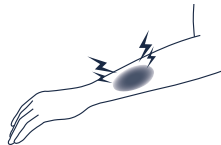

肌に強い痛みや、赤くなった状態が 2 日以上続く場合は使用を中止してください。


### お手入れできる部位と使用時間の目安

※使用時間や照射回数はあくまで目安となります。  
※本製品は男性でもお使いいただけます。

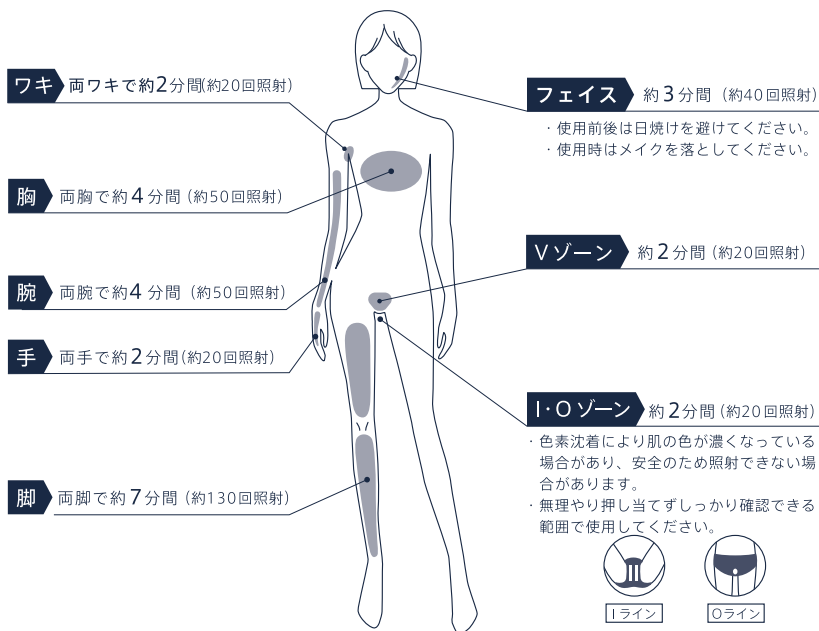

### ムダ毛ケアモードの使い方

※基本的にサングラスの着用は必要ありませんが、照射光が苦手な方はご着用ください。

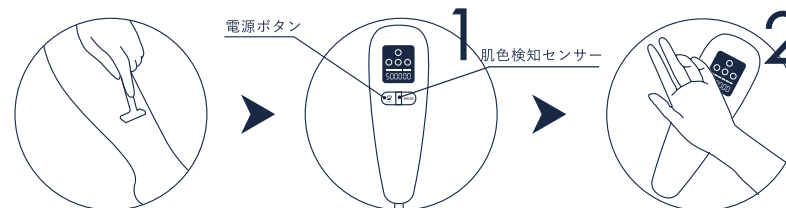

#### 準備


シェーバーや安全カミソリで事前に除毛します。毛の長さは 1mm 以下にしてください。

#### 電源 ON

電源コードをつなぎ、電源ボタンを 2 秒間長押しで電源 ON。

#### 肌色検知

※検知後、照射可能な状態になります。使用前に肌色検知センサーで肌の色を検知します。肌がセンサー全体を覆うようにしっかり当ててください。正しく検知されると、内部のファンが起動し、照射できるようになります。

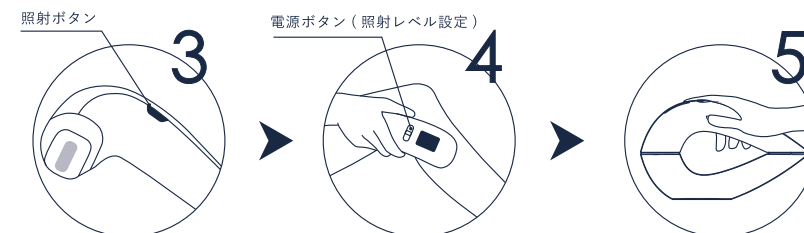

#### オート / マニュアル照射

肌色検知後はマニュアル照射モードになっています。側面にある照射ボタンを押して照射していきます。照射ボタンを 2 秒間長押しすると、スピーディーなケアが可能なオート照射モードに切り替わります。

#### 照射レベル

肌色検知結果に応じて、自動で照射レベルを調整します。そのほか、使用中に電源ボタンを押すと、照射レベル 1~9 までお好みで調整できます。

#### 電源 OFF

使用後は電源ボタンを長押しして電源を OFF。30 秒間のクールダウン後、停止します。

※液晶ディスプレイの 30 秒カウントダウンは本体を冷却するための設定です。電源コードを抜かず、そのまま 30 秒をお待ちください。

※セーフティ機能搭載のため、照射口が肌にしっかりと当たらないと照射されません。

### 美肌ケアモード、アクネケアモードの使い方

電源を入れ、肌色検知をした後、モード切り替えボタンを押すと、美肌ケア (SC) モード、アクネケア (AC) モードに切り替えることができます。詳細は、取扱説明書をご覧ください。