



取扱説明書

STELLA
BEAUTEBeauty Face Stick
ビューティフェイススティック

目次

安全上のご注意	01
使用上のご注意	03
各部の名称とはたらき	04
同梱物	04
使用する前に	05
使用方法	06
お手入れ	12
故障かなと思ったら	12
よくある質問	13
電池寿命	13
廃棄方法	13
製品仕様	14
保証とアフターサービス	14
無償修理規定	15
保証書	16

保証書在中

このたびはSTELLA BEAUTE製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

-お客様の安全と正しい使い方のため、本『取扱説明書』を必ずお読みください。

-ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

-保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、『取扱説明書』とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

△ 危険	「使用者が死亡または重傷を負う危険性が高いと想定される内容」です。
△ 警告	「使用者が死亡または重傷を負う可能性があると想定される内容」です。
△ 注意	「使用者が傷害を負う危険が想定される場合、及び物の損害の発生が想定される内容」です。 ※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。
①	「してはいけない内容」です。
②	「実行しなければならない内容」です。

△ 危険

②	下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に本製品の使用しないでください。 事故や医用電気機器の誤作動をまぬくおそれがあります。
-	ベースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器 -人工心肺などの生命維持用医用電気機器 -心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器
①	本製品は金属アレルギーに配慮した素材を使用しておりますが、個人差がございますので、パッチテストでのご確認を実施した上でご使用ください。

△ 警告

②	下記に当てはまる方は本製品を使用しないでください。 事故やトラブルのおそれがあります。
-	心臓疾患の方 -出血性疾患（血友病など）の方 -紫斑になりやすい方 -血压に異常のある方 -幼児や成長期の子供、ご自分で説明書の内容を理解できない方 -皮膚に知覚障害、神経障害のある方 -皮膚アレルギー、皮膚病及びアトピー性皮膚炎のある方 -妊娠中及び出産直後の方 -発熱・体調がすぐれない方、疲労が激しい方 -飲酒している方 -ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬、眠気を誘う薬を服用している方

△ 警告

②	次のような場所で本製品の使用・保管しないでください。 製品の故障や事故、けがのおそれがあります。
-	ほこりの多い場所 -高温・多湿の場所（車中・浴室など） -油煙・湯気の当たる場所 -直射日光の当たる場所 -強い電波や磁気の発生する場所 -乳幼児の手の届く場所 -引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近く

△ 製品を下記のようないしをしないでください。

感電・火災およびけが、故障・破損のおそれがあります。
頭部に金属（ボルトやプレート、金属糸など）埋め込んでいる方。
顔、頭部をけがしている方、または手術（形成、整形、美容など）したことがある方
今までに重い病気をした方
骨粗しょう症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の方
悪性腫瘍のある方
感染症疾患のある方
有熱性疾患のある方
糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
身体に異常を感じている方
歯の治療、または矯正中の方
その他医療機関で治療中の方
敏感肌の方

△ 記載されている用途以外には使用しないでください。

※上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

安全上のご注意(続き)

△ 警告

②	肌や体に痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止してください。肌、身体のトラブルのおそれがあります。
②	下記の箇所には本製品を使用しないでください。 肌、身体のトラブルのおそれがあります。
-	・傷口、目（眼球）・口・鼻の中・耳の中・喉仮、へそ、粘膜部位 ・過度の日焼け、皮膚炎などお肌に異常のある部位 ・はれもの、ニキビや吹き出物、湿疹などの部位
-	・外科手術を受けた部位 ・神経障害、皮膚知覚障害のある部位 ・交通事故などにより、後遺症がある部位
②	皮膚が薄い部位、骨のすぐ上に長時間使用しないでください。 肌、身体のトラブルのおそれがあります。

△ EMS

②	下記のEMSを使用する際は心臓の近くには使用しないでください。 事故やトラブルのおそれがあります。
①	目の周辺に使用する際はよく注意を払いながら、使ってください。滑って目を突くなど、思わず事故やけがのおそれがあります。
①	本製品は金属アレルギーに配慮した素材を使用しておりますが、個人差がございますので、パッチテストでのご確認を実施した上でご使用ください。

△ 警告

②	下記に当てはまる方は本製品を使用しないでください。 事故やトラブルのおそれがあります。
-	化粧品（ジェルなど）と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ず肌との相性テストを行ってください。

△ 注意

②	下記の場合には使用しないでください。 事故や肌、身体のトラブル、けがのおそれがあります。
-	・ペットには使用しないでください。 他の電気製品（美容機器など）と同時に使用しないでください。 使用前に電極の割れ、変形、破損がないかを確認し、破損・故障した場合は使用しないでください。

△ 注意

①	本製品を下記のようないしをしないでください。 事故や肌、身体のトラブルのおそれがあります。
-	・電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分洗ってください。 ・使わないときは乾いた布で拭き、定期的に清掃してください。
①	本製品を下記のようないしをしないでください。 事故や肌、身体のトラブルのおそれがあります。
-	・電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分洗ってください。 ・使わないときは乾いた布で拭き、定期的に清掃してください。
②	下記に当てはまる場合は使用しないでください。 事故や肌、身体のトラブル、けがのおそれがあります。

△ 記載されている用途以外には使用しないでください。

※上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

安全上のご注意(続き)

△ 警告

②	電源・充電ケーブルの取り扱いに関して、下記の内容をしないでください。感電・火災、故障・破損及びけがのおそれがあります。
-	・ぬれた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。 ・充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ・充電ケーブルは水につけたり、水洗いしたりしない。また、風呂・シャワーチamberの水回りで使用・充電しないでください。 ・充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。または、重い物を載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。 ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。 ・付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。 ・他の製品へのご使用もやめください。

②	電極（エフェクトロッド・ヒートサーフェイス）や電極バーに充電ケーブルや金属類を接触させないでください。
---	---

②	ACアダプターは同梱されていません。 お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源を確認してください。(本製品はDC 5V 1A)
---	---

△ 注意

②	化粧品（ジェルなど）と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ず肌との相性テストを行ってください。
---	--

△ 注意

①	本製品を使用する前・使用中・使用後に下記の内容を必ず守ってください。
---	------------------------------------

②	初めて使用する際は充電してから使用してください。
---	--------------------------

③	初めて使用する前は必ずパッチテストを行い、EMSの強さを「弱」から使ってください。
---	---

④	電源を入れ、温感&EMSモード（LEDライト赤）に設定して、約1分後にヒートサーフェイスを塗布部に約30秒間当ててください。
---	--

④	エフェクトロッドを使用し始める際は弱い力で押し込んで、力加減に注意してお肌
---	---------------------------------------

STELLA
BEAUTE

Kirala Co., Ltd

〒103-0004

東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kiralaビル
<https://www.stellabeaute.jp/beautyfacingstick>



使用方法(続き)

■各モードの説明

部位	モード	モード表示	LEDライト	スポットセンシング	EMS/出力調整	温感	稼働時間
エフェクトロッド	スポットセンシング	SPOT 白点灯	青点灯	ON	-	-	継続
	EMS スポットセンシング	SPOT 白点灯 EMS 弱 中 強	緑点灯	ON	ON	-	10分間
ヒートサーフェイス	EMS	EMS 弱 中 強	オレンジ点灯	-	弱/中/強	-	10分間
	温感 EMS	EMS 弱 中 強 HEAT 白点灯	赤点灯	-	ON	-	10分間

※自動OFF機能: 電源が入った状態で、5分間操作がない場合、自動的に電源OFFになります。

■各モードの使用方法

[エフェクトロッド]


スポットセンシング モード

スポットを探す

1.電源を入れて、肌感知調整スイッチがエフェクトロッド側にスライドされていることをご確認ください。

2.電極バーをしっかりと握って、センシングしたい部位にエフェクトロッドでなぞり、スポットを感知した場合、提示音が「ピッピッピッ」と鳴ります。

※ エフェクトロッドを押し込んだ場合、スポットではない場所でも音が鳴ることがあります。

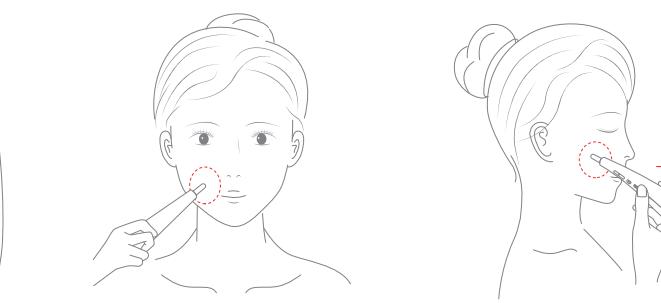

[エフェクトロッド] EMS&スポットセンシング モード


EMSを肌に流し、表情筋をトレーニング

電極バーを握りながら、エフェクトロッドをしっかりと肌に当ててゆっくりやさしく押し込んでください。

※ 押し込んだ状態のみEMSが作動します。

※ EMS切り替えボタンを押して、EMSレベル弱、中、強の調整ができます。

※ スpotセンシングも同時に使用できます。

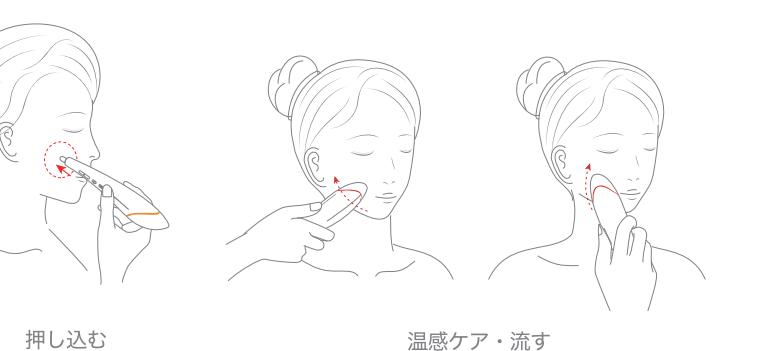

当てる → 押し込む

お手入れ

毎回使用後に乾いた布やティッシュなどで、エフェクトロッド、ヒートサーフェイスを中心に本体をきれいに拭いてから専用ポーチにいれて保管してください。

※化粧品などが付着している状態で放置しないでください。
※洗剤・アルコールなどで拭かないでください。
※お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

故障かなと思ったら

■電源/充電問題

電源が入らない

・充電できていますか?
・ボタンを2秒以上長押ししていますか?

充電して数分しか使えない

・自動OFF機能で、電源を入れて5分以内に操作がない場合、自動電源OFFになります。
・電池残量が少なくなっています。充電してください。
・正しく充電できていません。
充電完了は青点灯になります。5分後に消灯します。
・電池の寿命です。販売店またはKiralaリレーションシップセンターにご連絡ください。

充電できない

・充電ケーブルはしっかり繋いでいますか?
・充電中は赤ランプが点滅していますか?

■機能問題

EMSが弱い、あまり感じない

・レベルを上げてください。
・しっかりと電極バーを握り、お肌にあててください。

・お肌が乾燥していませんか?
お肌が乾燥していると、電流が流れにくくなります。
→化粧水や乳液などで水分を補ってからご使用ください。

EMSが強い、痛すぎる

・EMS調整ボタンを押して、レベルを下げてください。

エフェクトロッドのEMSが流れてない感じ

・しっかりと押し込んでいますか?
→しっかりと押し込まないと、EMSが正しく作動できません。

ヒートサーフェイスが温まらない

・温感&EMSモードに切り替えると、しっかりと温まるまで約数十秒から1分間までかかることがあります。

・温感&EMSモードは10分稼働後に自動OFFになります。
LEDライトが消えると再度本体を起動ご利用ください。
・しっかりとお肌にあってて、押し込んでください。

スポットセンシングができない

→日によって肌の調子が変わるために、センシングしにくい場合があります。一度肌感知調整を行ってからご使用ください。

・肌感知調整しましたか?
・お肌が乾燥していませんか?

お肌が乾燥していると、電流が流れにくくなります。
→化粧水や乳液などで水分を補ってからご使用ください。

よくある質問

■モデル名

SB-BFS01-01, SB-BFS01-02,
SB-BFS01-03, SB-BFS01-04

■定格電源

DC 5V 1A

■消費電力

約 4W

■使用電池

700mAh リチウムイオン電池

■充電時間

約 1.5 時間

■動作時間

約 1 時間※① ~ 16 時間 ※②

(※ ① EMS & 温感モードを継続使用する場合
※ ② スpotセンシングのみを継続使用する場合)

■外形寸法

約 W34mm × D35mm × H192mm

■製品質量

約 100g

■材質

PC樹脂、ステンレスなど

■保証書の提示がない場合

保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

■取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷

使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷

■一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷

■購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

■保証とアフターサービス

■保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常

が生じたときは、お買い上げの販売店、またはKiralaリレーショナシップセンターへお問い合わせください。

■保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき対応をいたします。

■修理を依頼されるときは

お買い上げになってから1年間は、保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。本品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、またはKiralaリレーションシップセンターへご依頼ください。

本製品を絶対に分解しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。
温感&EMSモードは10分稼働後に自動OFFになります。
LEDライトが消えると再度本体を起動ご利用ください。
しっかりとお肌にあってて、押し込んでください。

■スポットセンシングができない

→日によって肌の調子が変わるために、センシングしにくい場合があります。一度肌感知調整を行ってからご使用ください。

■肌感知調整しましたか?

お肌が乾燥していませんか?
お肌が乾燥していると、電流が流れにくくなります。
→化粧水や乳液などで水分を補ってからご使用ください。

※ご記入の場合は無効となります。

製品仕様

■モデル名

SB-BFS01-01, SB-BFS01-02,
SB-BFS01-03, SB-BFS01-04

■定格電源

DC 5V 1A

■消費電力

約 4W

■使用電池

700mAh リチウムイオン電池

■充電時間

約 1.5 時間

■動作時間

約 1 時間※① ~ 16 時間 ※②

(※ ① EMS & 温感モードを継続使用する場合
※ ② スpotセンシングのみを継続使用する場合)

■外形寸法

約 W34mm × D35mm × H192mm

■製品質量

約 100g

■材質

PC樹脂、ステンレスなど

■保証書の提示がない場合

保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

■取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷

使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷

■一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷

■購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

■保証とアフターサービス

■保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常

が生じたときは、お買い上げの販売店、またはKiralaリレーショナシップセンターへお問い合わせください。

■保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき対応をいたします。

■修理を依頼されるときは

お買い上げになってから1年間は、保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。本品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、またはKiralaリレーションシップセンターへご依頼ください。

本製品を絶対に分解しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。
温感&EMSモードは10分稼働後に自動OFFになります。
LEDライトが消えると再度本体を起動ご利用ください。
しっかりとお肌にあってて、押し込んでください。

■スポットセンシングができない

→日によって肌の調子が変わるために、センシングしにくい場合があります。一度肌感知調整を行ってからご使用ください。

■肌感知調整しましたか?

お肌が乾燥していませんか?
お肌が乾燥していると、電流が流れにくくなります。
→化粧水や乳液などで水分を補ってからご使用ください。

※ご記入の場合は無効となります。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態保証で期間内に故障した場合には、無償にて対応をさせていただきます。(消耗品・付属品を除く)