

600MM x 200MM

取扱説明書



STELLA BEAUTE

シェイプキャビテーション

保証書在中

このたびはSTELLA BEAUTE製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- 使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
- 製品に関するお問い合わせはL'EMBELLIR STELLA BEAUTE(ランベリーステラポーテ)にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00
(年末年始等特別休日除く)

<https://stellabeaute.rightsupport.help>




製造・販売

Kirala Co.,Ltd.

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kiralaビル

<https://www.stellabeaute.jp/>

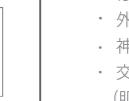

目次

安全上のご注意	1~3
各部の名称	3
各モードのはたらき	4
ご使用の前に	4~5
基本的な使い方	5
各モードの使い方	6~7
使用後のお願い	7
本製品のメンテナンス	7
故障かなと思ったら	8
よくあるご質問	8
充電池について	9
付属品・製品仕様	9~10
保証とアフターサービス	10
無償修理規定	11

安全上のご注意

人体への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りください。誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

△ 危険	使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容
△ 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容
△ 注意	使用者が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容 ※ 物的損害とは、家屋・家財及び畜産・ペットに関わる拡大損害を示します。

① 「してはいけない内容」 ② 「実行しなければならない内容」

△ 危険

① 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しないでください。
- ベースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル
- 人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器
- その他、体内に装着する医療用電子機器
(医療用電子機器の誤動作、事故や体調不良の原因)

△ 警告

① 下記の箇所には本製品を使用しないでください。
- 頭部、傷口、目、口、唇、鼻の中、耳の中、喉仮、喉頭、乳首、乳輪、性器
- 過度の日焼け、皮膚炎などお肌に異常のある部位
- はれもの、ニキビや吹き出物、湿疹などの部位
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- 付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。
- RF電極や超音波電極などに充電ケーブルや金属類を接触させないでください。
- 汚れ・ほこりなどは乾いた布で拭き、定期的に清掃してください。
(肌、身体のトラブルの原因)

1

△ 警告

① 次のような方は使用しない。
(事故やトラブルの原因になります)
- 心臓疾患障害及びその疑いのある方
- 幼児や自分で意思表示できない方
- 温度や刺激の感覚が自覚できない方
- 妊娠初期から出産直後までの方
- 自己免疫疾患のある方
- 子宮内膜症や子宮筋腫など子宫に疾患のある方
- 次のような方はご使用前に医師にご相談ください。
- 急性疾患、感染症疾患、悪性腫瘍のある、有熱性疾患の方
- 高血圧や血液疾患のある方、発熱している方
- 糖尿病などの高度な末梢循環機能障害による知覚障害のある方
- 神経障害のある方
- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方、通院して薬を服用中の方
- アレルギー体质、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある方や使用に際してお肌に不安のある方
- 使用中または使用後に肌に赤み・はれ・かゆみなどの異常が現れた場合、または体に痛み、異常を感じたときに使用を中止してください。
(肌、身体のトラブルの原因)
- 本製品はEMS機能が含まれているため、使用する際は心臓の近くでは使用しないでください。
- 本製品は、お肌に水、基礎化粧水やジェルを塗布してからご使用ください。
※オイル、ボディソープ、スクラブ etc. またはお肌 強化化粧品、機能性化粧品を使用しないでください。
- 顔に使用する時は、必ずメイクを落としてからご使用ください。
- 本製品使用時は力を入れて肌にこすりつけに、ゆっくりと移動しながら1つの部位に長時間使用しないでください。
- 電極部とお肌との間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充してください。
化粧品・水などがないと、RF(ラジオ波)・EMS(筋肉刺激)・超音波振動(キャビテーション)の伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。
※本製品を下記のように扱わないでください。
- 充電式電池内蔵のため、火中投入・加熱および高温での充電使用・放置保管はしないでください。
- 重い物を置いたり、使用中に落させたりなど、強い衝撃を与えないでください。
- 不安定な場所に置いたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 分解や修理・改造をしないでください。
- 本製品はIPX6防水仕様のため、シャワーでの使用は可能ですが、水の中に浸けないでください。充電口のキャップを外さず使用してください。
- 异臭・異常発熱した時は使用しないでください。破損・発火のおそれがあります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
(感電、ショート、発熱、発火、破裂による火災などの原因)

△ 警告

① 下記の箇所には本製品を使用しないでください。
- 頭部、傷口、目、口、唇、鼻の中、耳の中、喉仮、喉頭、乳首、乳輪、性器
- 過度の日焼け、皮膚炎などお肌に異常のある部位
- はれもの、ニキビや吹き出物、湿疹などの部位
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- 付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。
- RF電極や超音波電極などに充電ケーブルや金属類を接触させないでください。
- 汚れ・ほこりなどは乾いた布で拭き、定期的に清掃してください。
(肌、身体のトラブルの原因)

2

△ 警告

① 使用しないとき、清掃のときは必ず電源を切って、充電ケーブルをコンセントからぬいてください。
- 万が一、異常が発生したら直ちに電源を切ってください。
- 内蔵電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分に洗って、すぐに医師の診断を受けてください。
(感電・ショートによる火災などの原因、または火傷の恐れ)

各モードのはたらき

Faceケアモード
RF(ラジオ波) + DFRP(低周波微電流) + GREEN LED

Bodyケアモード
RF(ラジオ波) + DFRP(低周波微電流) + CAVI(キャビテーション) + BLUE LED

Burnケアモード
RF(ラジオ波) + DFRP(低周波微電流) + CAVI(キャビテーション) + RED LED

△ 使用上のご注意

① 本製品を使用する際に下記の内容を必ず守ってください。
- 初めて使用する際は充電してからご使用ください。
- 初めて使用する前は必ずバッチテストを行ってください。(P.4バッチテストをするを参照)
- 敏感肌の方は、状態を見ながら使用し、使用時間の目安を絶対に守ってください。
- ピアス、ネックレスなどのアクリセサリーは外してからご使用ください。
- 顔に使用する際、歯の治療中の方(インプラント・矯正・銀歯など)歯に詰め物・被せ物がある方は各モードのレベルを調節してご使用ください。
- Burnケアモードをご使用する際、お肌に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止してください。
- 本製品は、お肌に水、基礎化粧水やジェルを塗布してからご使用ください。
※オイル、ボディソープ、スクラブ etc. またはお肌 強化化粧品、機能性化粧品を使用しないでください。
- 顔に使用する時は、必ずメイクを落としてからご使用ください。
- 本製品使用時は力を入れて肌にこすりつけに、ゆっくりと移動しながら1つの部位に長時間使用しないでください。
- 電極部とお肌との間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充してください。
化粧品・水などがないと、RF(ラジオ波)・EMS(筋肉刺激)・超音波振動(キャビテーション)の伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。
※本製品を下記のように扱わないでください。
- 充電式電池内蔵のため、火中投入・加熱および高温での充電使用・放置保管はしないでください。
- 重い物を置いたり、使用中に落させたりなど、強い衝撃を与えないでください。
- 不安定な場所に置いたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 分解や修理・改造をしないでください。
- 本製品はIPX6防水仕様のため、シャワーでの使用は可能ですが、水の中に浸けないでください。充電口のキャップを外さず使用してください。
- 异臭・異常発熱した時は使用しないでください。破損・発火のおそれがあります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
(感電、ショート、発熱、発火、破裂による火災などの原因)

各部の名称

■ 本体

※ Dynamic Fast Rhythm Pulseの略称で、STELLA BEAUTEによって開発され、独自の電気刺激方式を使用しており、合計16個のEMS電極を8つのペアに分割、各ペアに対して異なるタイミングで電気パルスを流します。時間内に電気パルスの流れの速度が徐々に速くなる点が大きな特徴です。

■ 同梱物

- 取扱説明書(保証書付)
- 製品保証延長サービスのご案内
- 充電ケーブル(USB - TypeC)
- 台座
- ※ACアダプターは付属されていません。

3

ご使用の前に(続き)

■ 本製品は、顔・体にご使用いただける家庭用美容機器です。お手入れ前に以下を必ずお読みになってからご使用ください。

ご準備

・顔に使用するときは、必ずメイクを落としてからご使用ください。
・お肌を清潔にした状態でご使用ください。

ご注意

・お肌にニキビや吹き出物などの異常がないことを確認した上でご使用してください。
・お肌に異常がある部位には使用しないでください。
・使用中にお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医師にご相談ください。

お手入れの目安

モード	Face	Body	Burn
使用部位	顔	体	
使用推奨時間	約5分	約10分	
使用頻度	週に3~4回		
併用可能な化粧品	基礎ジェル、化粧水 ※油分や刺激の強い化粧品は使わないでください。		

ご使用の前に

■ 充電する

- 充電ケーブル(USB - TypeC)と本体を接続する
- コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む



1部位1回10分以内、1日合計30分以内を自安にご使用ください。
翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。
※あくまでも自安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。
※過度な使用はお肌を傷める原因となります。
※お肌を十分に保湿した状態でご使用ください。

ご使用の前に

■ 充電する

- 充電ケーブル(USB - TypeC)と本体を接続する
- コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む

充電不足	モード表示ランプが5回点滅(音あり)、自動電源OFF
充電中	モード表示ランプのBody/Burnが順に点滅
充電完了時	モード表示ランプが全て点灯

※ACアダプターは同梱されておりません。お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源を確認してください。(本製品はDC5V 2A)
※充電中は使用できません。
※充電中に倒れないように横にして置いてください。

■ 各部の名称

※ACアダプターは同梱されておりません。お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源を確認してください。(本製品はDC5V 2A)
※充電中は使用できません。
※充電中に倒れないように横にして置いてください。

■ 本体

※ACアダプターは同梱されておりません。お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源を確認してください。(本製品はDC5V 2A)
※充電中は使用できません。
※充電中に倒れないように横にして置いてください。

■ パッチテストをする

化粧品(ジェルなど)と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。

1. 準備する
お肌を素肌の状態にしてください。メイクを落とした後に、化粧水やジェルなどをお肌を十分に保湿します。

2. 電源をONにする
電源/モード切替ボタンを2秒長押ししてください。提示音が「ピッ」と鳴ると、電源がONになります。

3. モードを選ぶ
電源/モード切替ボタンを押してください。好きなモードを選んでください。

4. レベルを調整する
レベル調整ボタンを押して、レベル1~5の順番で切り替わります。

5. お肌にあてる
電極部全体をケアしたい部位にあてて、ゆっくり動かしてください。すべりづらい場合、化粧水やジェルなどを補充してください。

6. 使用終了
電源ボタンを長押し(約2秒)してください。提示音が「ピッピッ」と鳴ると、電源がOFFになります。

5

600MM x 200MM


各モードの使い方

■Faceケアモード

顔にはFaceケアモードのみご使用ください。
ケアの前は洗顔をしてお化粧や汚れを取り、お肌を清潔な状態にしてください。


「基本的な使い方」を参考し、Faceケアモードに設定してください。

電極部全体が顔に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。(初めはレベル1を使ってください。)

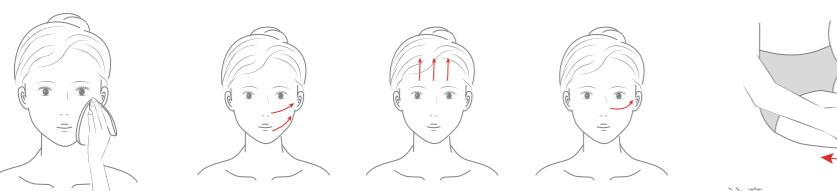

注意

1. 頭部には使用しないでください。
2. 頭全体で1回10分以上使用しないでください。
3. まぶた、目の周り、のどほとけ、鼻、耳、唇に使用しないでください。
4. 領に使用する場合は、EMSが歯の神経に刺激を与える場合があります。強く押さないでください。
5. 首すじに使用する場合は、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

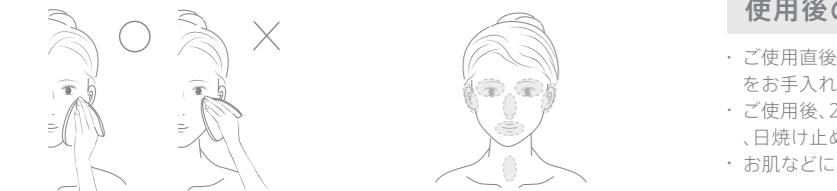


■Bodyケアモード

全身にお使いいただけます。

ケアの前は汚れを取り、お肌を清潔な状態にしてください。

「基本的な使い方」を参考し、Bodyケアモードに設定してください。

電極部全体がお肌に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。(初めはレベル1を使ってください。)

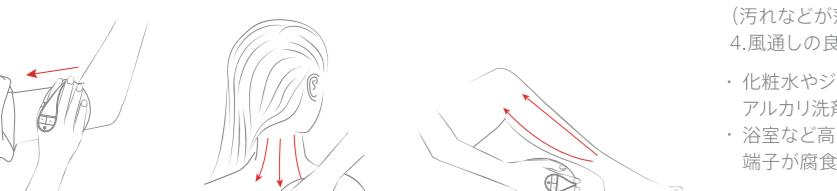

- 注意
1. 頭部や顔に使用しないでください。
 2. 手関節、ひざ関節、肩甲骨など部位に使用しないでください。
 3. 使用時には1ヶ所で止めず、必ず肌に対して本製品を動かしながらご使用ください。


6

■Burnケアモード

とくにケアしたい部分にお使いください。
ケアの前は汚れを取り、お肌を清潔な状態にしてください。

「基本的な使い方」を参考し、Burnケアモードに設定してください。

電極部全体がお肌に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。(初めはレベル1を使ってください。)

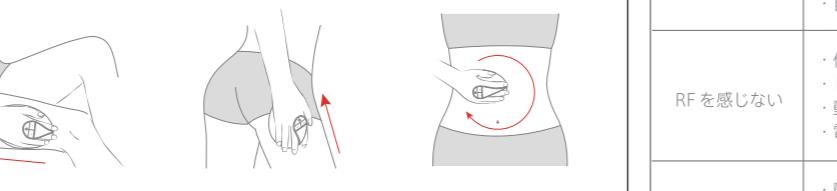

注意

1. 頭部や顔に使用しないでください。
2. 使用時には1ヶ所で止めず、必ず肌に対して本製品を動かしながら使用してください。

■他の便利機能

自動電源OFF機能

本製品は、モードを選択した時から10分が経過すると自動で電源OFFになります。

使用後のお願い

- ・ご使用直後に、香水や機能性化粧品、スクラブ成分含有の洗顔料・洗浄料・化粧品などをお手入れ部位に使用しないでください。
- ・ご使用後、24時間程度はなるべく紫外線に当たらないでください。外出される場合など、日焼け止めを活用してください。
- ・お肌などに異常が発生した場合、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。

本製品のメンテナンス

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
「感電・ショート・発火・故障の原因となります。」

1. 電源がオフになっていることを確認する
2. 本体についている毛を取り除く
3. タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れや水分を拭き取る
(汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。)
4. 風通しの良い場所で乾燥させます。
5. 化粧水やジェルなどが付着した状態で放置しないでください。
6. 浴室など高温多湿の場所に放置しない。本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。

7

故障かなと思ったら

事例	対処方法
----	------

- 電源が入らない
・電源ボタン押していない→電源ボタンを長押ししてください。
・充電されていない→充電してください。

- 電源が切れる
・充電不足→充電してください。
・自動電源OFF時→再度電源を入れてご使用ください。

- RFを感じない
・使用した部位が乾燥している→ジェル、水などで濡らしてください。
・レベルが低い→レベルを上げてください。
・動きが早い→ゆっくり動かしてください。
・電極部が肌にあたっていない→電極部全体を肌にあててください。

- RFが熱い
・動きが遅い→少し早く動かしてください。
・レベルが高い→レベルを下げてください。

- キャビテーションを感じない
・超音波振動は微少なので、体感がありません。

- EMSを感じない
・使用した部位が乾燥している→ジェル、水などで濡らしてください。
・レベルが低い→レベルを上げてください。
・感じににくい部位にあてている→部位を変えてください。
・EMSの感じ方は個人差があります。



※ このマークを自印にリサイクルしてください。

※ 1モードを継続使用する場合

※ 約2.5時間

※ 約W123×D98×H90mm

※ 約232g

※ PC樹脂、ステンレスなど

※ 10°C~35°C

※ リサイクルBOXなどに入れください。

※ 購買書に記載された方法で使用した場合の故障及び損傷

※ 保証書に記載された方法で使用した場合の故障及び損傷

※ 一般家庭以外(例えは業務用など)で使用された場合の故障及び損傷

※ 購買した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

※ 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。

※ 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

付属品・製品仕様(続き)

製品仕様

モデル名	SB-CAV01-01
定格電源	DC5V 2A
消費電力	約5W
使用電池	1500mAh リチウムイオン電池
充電時間	約5時間
動作時間	約2.5時間 *
外形寸法	約W123×D98×H90mm
製品質量	約232g
材質	PC樹脂、ステンレスなど
推奨環境温度	10°C~35°C

※ リサイクルBOXなどに入れください。

※ 購買書に記載された方法で使用した場合の故障及び損傷

※ 保証書に記載された方法で使用した場合の故障及び損傷

※ 一般家庭以外(例えは業務用など)で使用された場合の故障及び損傷

※ 購買した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

※ 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。

※ 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無償修理規定

故障かなと思ったら

事例	対処方法
----	------

- 内蔵充電池は消耗品です。フル充電を約300回繰り返した後は、本来の蓄電容量の約70%まで低下し、繰り返し充電を繰り返すことで、蓄電容量は徐々に低下していきます。

- 内蔵充電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化します。充電完了した状態、または内蔵充電池の減りが少ない状態で再充電を繰り返すと充電池の寿命が低下することがあります。

- 内蔵充電池は消耗品のため、保証期間(お買い上げ日から1年間)内であっても、蓄電容量の低下による無償対応は出来かねます。

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、リチウムイオン電池は再利用可能な貴重資源のため、廃棄する際は下記の内容をご確認した上で、リサイクルしてください。

- ・本製品を絶対に分解しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。

- ・テープなどで差し口(接続端子)をふさいでから充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。また、自治体のリサイクルルールに従って、指定した場所に設置してある「リサイクルBOX」などに入れください。

※ このマークを自印にリサイクルしてください。

※ 1モードを継続使用する場合

※ 約2.5時間

※ 約W123×D98×H90mm

※ 約232g

※ PC樹脂、ステンレスなど

※ 10°C~35°C

※ リサイクルBOXなどに入れください。

※ 購買書に記載された方法で使用した場合の故障及び損傷

※ 保証書に記載された方法で使用した場合の故障及び損傷

※ 一般家庭以外(例えは業務用など)で使用された場合の故障及び損傷

※ 購買した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

※ 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。

※ 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

付属品・製品仕様

付属品

保証書

商品名 シェイプキャビテーション

モデル名 SB-CAV01-01

お名前

電話番号

ご住所

店名

電話番号

販売店

住所

お買い上げ日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日より1年間

※ 消耗品及び付属品を除く

11

よくあるご質問

質問	回答
----	----

- Body/Burn モード
顔にも使えますか?

- ・お顔にはFace モードのみ使用可能です。

- 事前に使用禁止部位をご確認ください。(「安全上のご注意」参照)

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。

- 「感電・ショート・発火・故障の原因となります。」

- 浴室で使用できますか?