

H200xW200

2つ折り使い方ガイド

山折り

各モードの使い方

■Faceケアモード




本製品電極部全体が顔に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

■Bodyケアモード



本製品電極部全体がお肌に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

■Burnケアモード (セルライトなど気になる部位おすすめ)

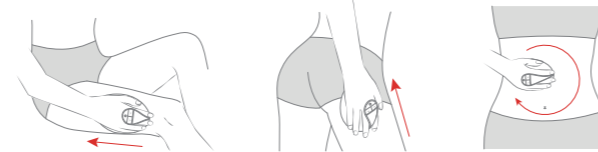

本製品電極部全体がお肌に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

- ※全てのモードにおいて、最初はレベル1を使ってください。
- ※Faceケアモード以外のモードは顔に使用しないでください。
- ※使用時には、1ヶ所に止めず、必ず肌に対して本製品を動かしながら使用してください。

お手入れの目安

モード	Face	Body	Burn
使用部位	顔	体	
使用推奨時間	約5分	約10分	
使用頻度	週に3-4回		
併用可能な化粧品	基礎ジェル、化粧水 ※油分や刺激の強い化粧品を使わないでください。		

- ・1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。
- ・翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。
- ※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。
- ※過度な使用はお肌を傷める原因となります。
- ※お肌が乾いた状態では動かすににくいいため、十分に保湿をしてからご使用ください。

シェイプキャビテーション 使い方ガイド




STELLA
BEAUTE

山折り

初めてのご使用時やしばらく使用しなかった場合


■パッチテスト

化粧品（ジェルなど）と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。

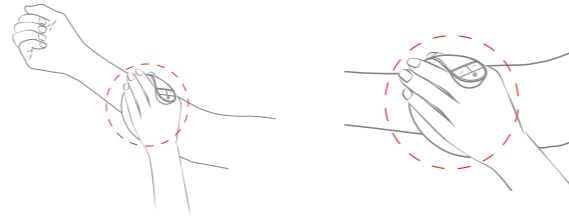

- ①パッチテストを行う部位（腕の内側）を石鹸で洗い、タオルで拭き取ってください。
 - ②使用する化粧品（ジェルなど）を洗った部位に薄く付けてください。
 - ③電源を入れ、BurnケアモードONに設定し、約1分後に本製品電極部をゆっくり動かしながら塗布部に約30秒間当ててください。
 - ④基礎ジェル、化粧水をふき取り、48時間後にお肌の状態を確認してください。
- ※48時間内にお肌に痛み・赤み・ほてりなどの異常を感じた場合はご使用は中止してください。

各部の名称とはたらき

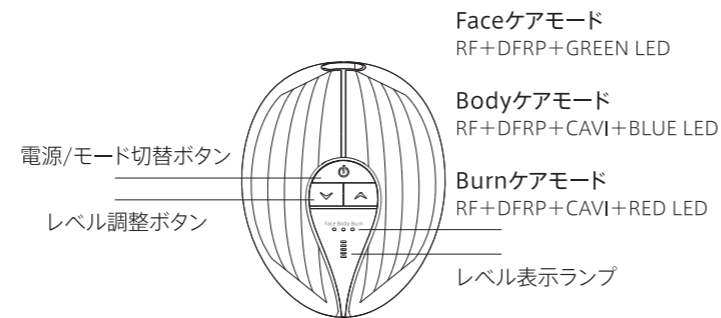


- ・RF（ラジオ波）：4つの内リングで肌をしっかりと温めます。
- ・DFRP：ダイナミックで早く繊細なリズムのパルスで筋肉にアプローチします。
- ・CAVI（キャビテーション）：超音波振動により、ボディケアをサポートします。
- ・GREEN LED：肌環境を整え、透明感のある肌へと導きます。
- ・BLUE LED：肌のキメを整え、毛穴を目立ちにくくします。
- ・RED LED：赤色LEDで肌にアプローチし、ハリをツヤを与えます。

基本的な使い方




準備する

お肌を素肌の状態にしてください。メイクを落とした後に、化粧水やジェルなどでお肌を十分に保湿します。

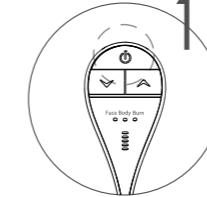


電源をONにする

電源/モード切替ボタンを2秒長押ししてください。提示音が「ピッ」と鳴ると、電源がONになります。

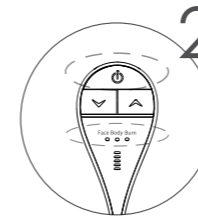

モードを選ぶ

電源/モード切替ボタンを押してください。好きなモードを選んでください。

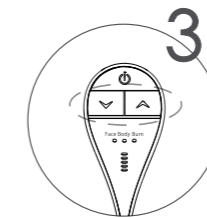


レベルを調整する

レベル調整ボタンを押して、レベル1～5の順番で切り替わります。



お肌にあてる

電極部全体をケアしたい部位にあてて、ゆっくり動かしてください。すべりづらい場合、化粧水やジェルなどを補充してください。

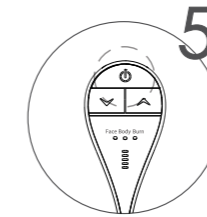

使用終了

電源ボタンを長押し（約2秒）してください。提示音が「ピッピッ」と鳴ると、電源がOFFになります。

STELLA BEAUTE オフィシャルサイト

<https://www.stellabeaute.jp/>

ブランドサイト



Instagram

