

## 取扱説明書

# STELLA

## BEAUTE

IPL光美容器



### 保証書在中

このたびは、STELLA BEAUTE 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。






- お客様の安全と正しい使い方のため、「取扱説明書」(本書)を必ずお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 目次

安全上のご注意	3~5
各部の名称	6~7
お手入れ前の準備	8
お手入れできる部位と使用時間の目安	9
使用方法	10~12
その他便利機能	13
使用後のお願い	13
本製品のメンテナンス	14
お手入れの頻度	15
故障かなと思ったら	16
肌トラブルについて	17
付属品・製品仕様	18
保証とアフターサービス	19
無償修理規定	20~21

## 安全上のご注意

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

 <b>危険</b>	使用者が死亡または重傷を負う危険性が高いと想定される内容
 <b>警告</b>	使用者が死亡または重傷を負う可能性があるとして想定される内容
 <b>注意</b>	使用者が傷害を負う危険が想定される場合、及び物的損害の発生が想定される内容 ※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。
	「してはいけない内容」
	「実行しなければならぬ内容」

- ⊘ 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しないでください。誤作動をまねくおそれがあります。
  - ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル。
  - 人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器。
  - その他、体内に装着する医療用電子機器。
- ⊘ 下記に当てはまる方には本製品を使用しないでください。
  - 生理中、妊娠中や授乳中の方  
(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因となる場合があります。)
  - アトピー性皮膚炎や湿疹、ヘルペス、ケロイドを起こしやすい方。
  - 皮膚知覚障害のある方や、太陽光で肌が特に荒れやすい方。
  - 体調のすぐれない方や、薬を服用している方  
(服用される薬によって肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因となるおそれがあります。)
  - 成長期の子どもは使用しない。18歳未満の場合は保護者が本書を読み、正しい使いかた・禁止事項を指導してください。  
(やけどや肌トラブルの原因となるおそれがあります。)※ 個人によって差がありますが、一般的な目安として子供の成長期は12歳までとなります。

## 安全上のご注意(続き)

- ⊘ 下記の箇所には本製品を使用しないでください。
  - 目や目の周り、耳、唇、頭、へそ、乳首、乳輪、粘膜や性器。
  - 日焼けした肌やかさぶた、傷、湿疹、肝斑(かんぱん)、ほくろなどの色素の濃い箇所。
  - 入れ墨・タトゥー、ボディペイントやアートメイクをしている箇所。
  - ボディクリームやフェイスクリーム、制汗剤、日焼け止め、香水などを塗っている箇所。
  - シリコン注入箇所やピアス、ボディピアスのある箇所。
  - 炎症を起こしている箇所や、血管腫や美容整形をしている箇所。
- ⊘ 日焼けをしてから約1週間は本製品を使用しないでください。
- ⊘ 本製品は防水仕様ではありません。濡れた手で使用したり、水のかかりやすい場所でのご使用はお控えください。
- ⊘ 暗い場所では使用しないでください。目に過度の刺激となる場合があります。
- ⊘ 肌以外に照射しないでください。事故や故障の原因となります。
- ⊘ 目に直接照射しないでください。顔に照射する時は目を閉じてください。機器から照射される強い可視および不可視の光が目や目を傷める可能性があります。
- ⊘ ACアダプターや電源コードが破損・故障した状態や、ホコリやゴミ、水分が付着した状態での通電・ご使用は絶対にやめてください。火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。
- ⊘ 本製品を通電させたまま長時間放置しないでください。思わぬ事故や誤作動、トラブルの原因となるおそれがあります。


## 安全上のご注意(続き)

- ⚠ ACアダプターや電源コードは本製品に付属する専用の物を使用し、使用電圧などは必ず本書記載に従ってください。
- ⚠ ご使用になる箇所は、必ずアクセサリーや貴金属は外してください。
- ⚠ ファンデーションなどメイクアップ用品をつけた状態でフラッシュ照射をしないでください。必ずメイクを落としてから使用してください。やけどや肌トラブルのおそれがあります。
- ⚠ ご使用中は通気口を手や体でふさがないようにご注意ください。本製品が発熱する原因となります。
- ⚠ 使用頻度や使用部位は本書の案内に従ってください。
- ⚠ 本製品を使用し、使用後もしばらく痛みや不調が続いたり発疹、かゆみ等、皮膚に異常が現れた場合は、使用を中止し、医師の診療を受けてください。
- ⚠ 同じ部位にムダ毛ケアモード、アクネケアモード、美肌ケアモードを同時に使用しないでください。やけどや肌トラブルのおそれがあります。
- ⚠ セーフティー機能搭載のため、照射口が肌にしっかりと当たらないと照射されません。
- ⚠ 本製品の本来の用途(ムダ毛ケア、美肌ケア、アクネケア)以外の用途で使用したり、異なる手順で操作をしないでください。事故や体調不良が生じるおそれがあります。

## 各部の名称

本体側(光美容器)


スタンド側

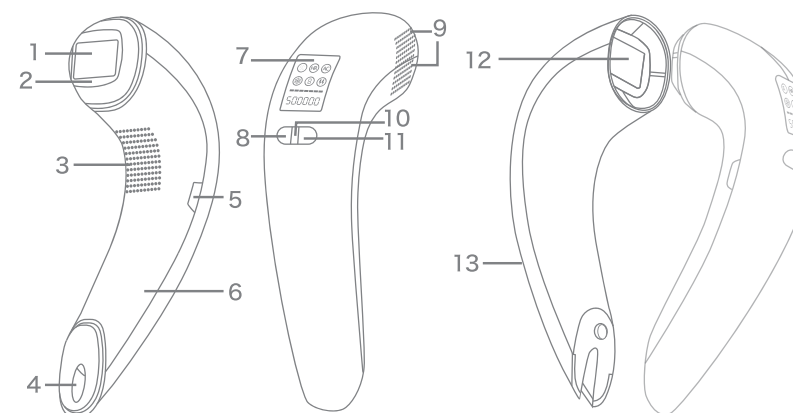

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. 照射口        | 8. 電源ボタン(照射レベル設定)      |
| 2. 冷却プレート     | 9. 換気口(排出)             |
| 3. 換気口(吸入)    | 10. 肌色検知センサー/ランプ[赤]    |
| 4. ACアダプター差込口 | 11. モード切替ボタン(冷却ON/OFF) |
| 5. 照射ボタン      | 12. LEDクリーンライト         |
| 6. グリップ       | 13. クリーンシステムスタンド       |
| 7. 液晶ディスプレイ   | ※単4電池2本使用              |

## 各部の名称(続き)


### ディスプレイ

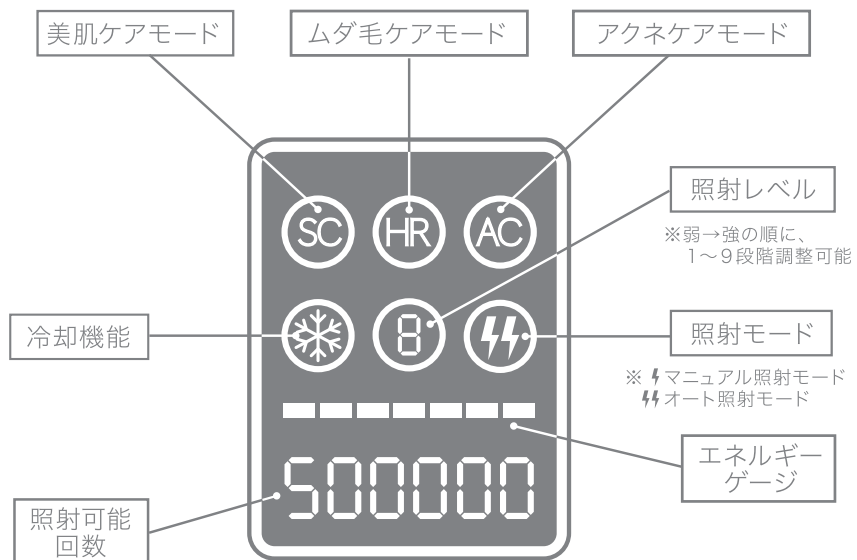


※初期状態の照射可能回数表示は50万回。  
※本体起動後、照射中は照射回数がカウントされ、ディスプレイに表示されます。

### AC アダプター

### 電源コード

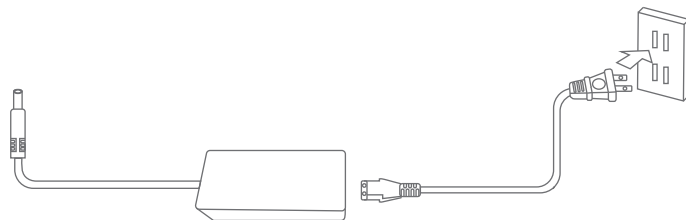

## お手入れ前の準備

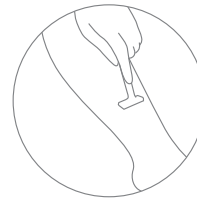

- お肌のお手入れ箇所を清潔にし、シェーバーで毛を剃った状態でご使用ください。なお、香水、乳液、クリームなどが残っていない状態にしてください。
- 照射面に汚れやホコリ、毛などは必ずきれいに拭きとり、付着物がないことを確認してから照射してください。付着物が残った状態でのご使用は、肌トラブルや製品の故障・劣化等の原因となります。


### ご使用のポイント

- ① ワキのお手入れ  
お手入れする前に、ワキにつけている制汗剤や香水、その他化粧品などが残っていない状態にしてください。シワがある部分は指先で伸ばしてご使用ください。
- ② VIOゾーンのお手入れ  
色素沈着や色が黒ずんでいる箇所は照射レベルを下げてご使用ください。製品に体が慣れるまでは照射レベル1でのご使用をおすすめします。
- ③ 手と足のお手入れ  
関節部分など丸みのある部位はなるべく伸ばし、しっかり照射面を密着させてご使用ください。

## お手入れできる部位と使用時間の目安

※使用時間や照射回数はあくまで目安となります。

※本製品は男性でもお使いいただけます。

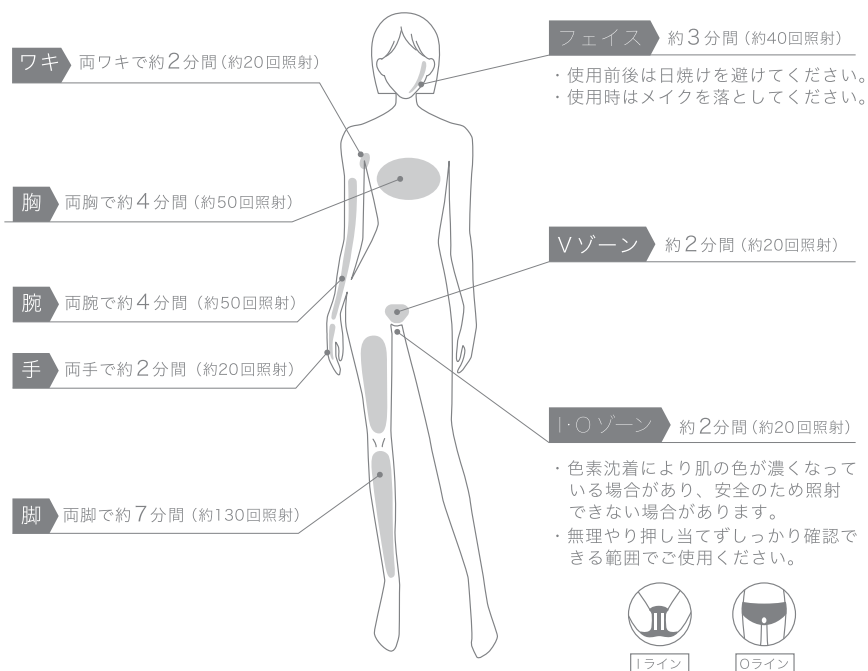

### 次に該当する箇所へのご使用はできません

傷痕、やけど痕のある箇所、治療中の傷がある部位、色が濃い部位、目の周り、しもやけ跡、ほくろ、タトゥー・入れ墨のある部位、眉毛、髪の毛、日焼けした箇所、やけどしている箇所。


※使用后24時間以内は、なるべく紫外線に当てないでください。  
※照射面から出る光は決して近くで直視しないでください。

## 使用方法

初めてのご使用時やしばらく使用しなかった場合

### ■パッチテスト

初めて使用するときや、しばらく使用せず久しぶりにご使用になる場合、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。

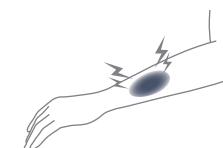

電源をONにし肌色検知した後、電源ボタンを押すたびに照射レベルが切り替わるので、照射レベル1からテストをしてください。

肌に強い痛みや、赤くなった状態が2日以上続く場合は使用を中止してください。

### 各モードの紹介

#### HR：ムダ毛ケアモード

多くのサロンで採用されている「IPLフラッシュ式」を採用。  
顔からVIO、脚先まで、全身のムダ毛ケアに対応します。

#### SC：美肌ケアモード

角質層にまで刺激を促し、継続的な使用で透明感とハリのある美しい肌へ導きます。

#### AC：アクネケアモード

気になる箇所に照射。キメを整えることによって、赤みや跡を目立ちにくく健やかな肌へと導きます。

※ 本製品は医療機器や永久脱毛機器ではありません。  
継続的なご利用でムダ毛の目立ちにくい肌を保つことができます。


## 使用方法(操作手順)

※ 基本的にサングラスの着用は必要ありませんが、照射光が苦手な方はご着用ください。




### 準備

シェーバーや安全カミソリで事前に除毛します。毛の長さは1mm以下にしてください。

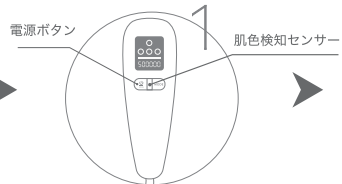


### 電源 ON

AC アダプターを本体に挿し込み、そして電源コードをつなぎ、電源ボタンを2秒間長押しして電源ON。

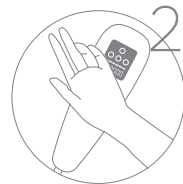


### 肌色検知

※検知後、照射可能な状態になります。使用前に肌色検知センサー（赤ランプ点滅ところ）で肌の色を検知します。肌がセンサー全体を覆うようにしっかり当ててください。正しく検知されると、内部のファンが起動し、照射できるようになります。

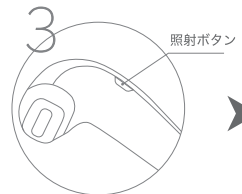

### オート / マニュアル照射

肌色検知後はマニュアル照射モードになっています。側面にある照射ボタンを押して照射していきます。照射ボタンを2秒間長押しすると、スピーディーなケアが可能なオート照射モードに切り替わります。

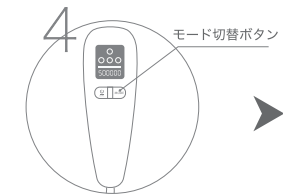


### モード切替

モード切替ボタンを押すと、ムダ毛ケア (HR) / アクネケア (AC) / 美肌ケア (SC) モードに切り替えができます。



### 照射レベル

肌色検知結果に応じて、自動で照射レベルを調整します。そのほか、使用中に電源ボタンを押すと、照射レベル1~9までお好みで調整できます。

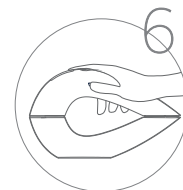

### 電源 OFF

使用後は電源ボタンを2秒間長押しして電源をOFF。30秒間のクールダウン後、停止します。

※ 液晶ディスプレイの30秒カウントダウンは本体を冷却するための設定です。電源コードを抜かず、そのまま30秒をお待ちください。

## 使用方法(操作ボタン)

### 電源ボタン・照射レベル設定

- ① 電源ボタンを2秒間長押しすると、電源のON/OFFができます。
- ② 電源を入れた後、電源ボタンを短く押すと、照射レベルを1~9段階に切替ができます。
- ③ 電源ボタンを2秒間長押ししてシャットダウンすると、画面に30秒のカウントダウンが表示されます。その間、本体から熱を放出させるためにファンが作動します。カウントダウンが終了すると、本体電源はOFFになります。

### モード切替ボタン・冷却機能 ON/OFF

- ① 電源を入れた後、モード切替ボタンを押すと、ムダ毛ケアモード (HR)、アクネケアモード (AC)、美肌ケアモード (SC) に切替ができます。
- ② 電源を入れた後、モード切替ボタンを2秒間長押しすると、冷却機能のON/OFFができます。

### 照射ボタン

- ① マニュアル照射モード(⚡と表示)：肌に照射口をあて、照射ボタンを押すと、1回の照射ができます。
- ② オート照射モード(⚡⚡と表示)：肌に照射口をあてると、照射ボタンを押さなくても一定間隔で自動的に照射されます。照射ボタンを2秒間長押しすると、マニュアル照射モードとオート照射モードの切替ができます。

※ 照射準備ができているもしくは照射中の場合、照射モードマーク(⚡・⚡⚡)が点滅します。



## その他便利機能

### LEDクリーンライト

本製品使用后、本体をスタンドに設置することで、クリーンライトによって清潔さを保ちます。作動時間は2分間です。

※ 本体をスタンドに設置後、ライトが2分間点灯します。

※ ライトが2分間を超えて常時点灯もしくは光らなくなったら電池を交換してください。

### 自動電源OFF

本体保護や誤作動を防止するため、電源を入れたてから肌色検知された後2分間操作がない場合、本体は自動的に電源OFFになります。

※電源を入れてから肌色検知をしない状態では自動的に電源OFFとはなりません。

### 肌色検知 + オート照射レベル設定

肌色検知センサーに肌を押し当てることで、センサーが肌の色を検出し、本体が自動的に肌の色に合わせた照射レベルを設定します。

**注意** 肌色検知センサーによって肌色の検出をしないと、照射を開始できません。

## 使用後のお願い

- ご使用直後に、香水や機能性化粧品、スクラブ成分含有の洗顔料・洗浄料・化粧品などをお手入れ部位に使用しないでください。
- ご使用后、24時間程度はなるべく紫外線に当てないでください。外出される場合など、日焼け止めを活用してください。
- お肌などに異常が発生した場合、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。
- 日焼けした状態で使用すると、肌トラブルの原因となります。本製品を使用中は日焼けをしないようご注意ください。日焼けをした場合は、1週間以上期間を空けてから本製品をご使用ください。
- ムダ毛ケアをした部位を治療や美容整形する場合、また治療後や美容整形後の部位をムダ毛ケアする場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

※ 正しい手順で使用していても、お肌の性質や体質によってはトラブルが発生してしまう可能性があります。お肌に異常が発生した場合は、本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

## 本製品のメンテナンス

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。

1. 電源を切り、電源プラグを抜いて製品を冷まします。  
※照射口は使用中熱くなります。清掃を行う前に必ず冷ましてください。
2. やわらかい布を少量の水で湿らせ、照射口をきれいにします。  
**注意** 本製品は防水仕様ではありません。製品を水や液体に濡らさないでください。
3. 汚れの状況に応じて、本体を乾いた掃除用クロスで丁寧に拭いてください。
4. 本体照射口をスタンドに置いてください。LEDクリーンシステムが自動的に作動します。
5. 注意事項  
(1) 本体の汚れは、乾いた布で拭きとってください。落としにくい汚れは水を含ませた布で拭きとり、その後は水分を十分に拭きとってください。本体を水や液体に浸したり、水洗いすることは故障や事故の原因となりますので絶対におやめください。  
(2) 研磨材、研磨用洗浄剤、刺激性の薬品などは絶対に使わないでください。  
(3) 電源コードやACアダプターは絶対に濡らさないでください。  
(4) 照射口や肌色検知センサーには、傷が付かないようご注意ください。  
(5) ご使用前後は必ず、照射口の清掃をしてください。

## お手入れの頻度

1. ムダ毛ケアの1サイクルは8週間とします。

**注意**

ムダ毛ケアは最初の数回だけでなく、継続的にご使用いただくことで、効果を実感していただけます。(効果は部位や個人により異なります。)

2. より効果を実感するには、最初の2カ月間はおよそ1～2週間ごとにムダ毛ケアをするようにしてください。

3. 毛の成長に合わせて定期的にご使用ください。毛が濃い場合は、適度に照射レベルや頻度を上げる必要があります。個人の毛の成長に応じて調整してください。

4. 3カ月目以降のお手入れ周期について

①滑らかな肌を維持するには、4～8週間ごとにムダ毛ケアすることをおすすめします。

②体の部位ごとに照射時間とお手入れ周期が異なるため、毛の成長状況を見て判断してください。毛の成長密度が約30%に達したら、ムダ毛ケアすることをおすすめします。

ムダ毛ケアモード		
使用する部位	最初の2カ月	3カ月目以降
ボディ	1週間に1度	2週間に1度
VIOゾーン	2週間に1度	4～8週間に1度
フェイス(女性)	2週間に1度	4～8週間に1度
ひげ(男性)	3日に1度	
美肌ケアモード・アクネケアモード		
顔(男性・女性)	3日に1度	

## お手入れの頻度(続き)

●使い始めや久しぶりにご使用いただく場合は、最初の2カ月と同じお手入れ頻度をおすすめします。

●一度お手入れをした後は、次の照射まで最低2日空けてください。過度のお手入れは肌トラブルの原因となります。

## 故障かなと思ったら

以下を実行しても直らないときは修理を依頼してください。

事例	対処方法
電源が入らない	・電源コードやACアダプターはしっかり接続されていますか？ →コード類を再度接続しなおしてください。
照射できない	・照射口が肌にしっかり押しあてられていますか？ →照射口を肌に密着させ、肌に垂直に押しあてた状態で照射してください。
	・照射口が肌以外にあたっていないか？ →照射口に異物がないことを確認してから、照射してください。
	・肌色検知は完了していますか？ →電源を入れただけでは照射できません。 必ず肌色検知センサーで肌色検知を行ってください。検知後、本体内部のファンが起動し、照射できる状態になります。
本体から音がする	・エネルギーゲージサインが全て点灯していますか？ →1回の照射が完了すると、エネルギーゲージサインが徐々に点灯していきます。全て点灯後に次の照射が可能になります。
本体から音がする	本体に内蔵されているファンの動作音です。異常ではありません。



## 肌トラブルについて

肌の反応	対処方法
照射中や照射直後 照射した部位に熱 さや痛みを感じる	・ 使用できない部位に使用していませんか？ →事前に使用禁止部位をご確認ください。(「安全上のご注意」参照)
	・ 強すぎる照射レベルに設定していませんか？ →電源/照射レベルボタンを押して照射レベルを下げてください。
	・ 同じ箇所に何度も照射していませんか？
照射中や照射後、 肌に赤みができる	体質や体調によっては、肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。直ちに使用を中止し、肌を冷却・保湿してください。使用後に肌の赤みが48時間経っても消えない場合、皮膚科の医師に相談してください。
照射直後に、焦げ たニオイがする	・照射する部位にムダ毛が残っていますか？ →照射時のIPL光でムダ毛に熱が加わり、焦げたにおいがする場合があります。しっかり除毛してからご使用ください。製品本体からニオイがする場合、直ちに仕様を中止して本体の電源をオフにしてください。

稀な肌の反応	対処方法
照射後、 腫れや赤みが2～3日 たっても消えない	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。
照射中や照射後、 明るくなったり、暗くなる など肌の色が変わる	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。
照射中や照射後、 火傷や水疱の反応が あらわれる	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。

## 付属品・製品仕様

### 付属品

本体	1
スタンド(台座)	1
ACアダプター	1
電源コード	1
取扱説明書	1
簡単使い方ガイド	1
会員登録カード	1
単4電池	2

### 製品仕様

モデル名	SB-IFD02-WH、SB-IFD02-BK
電源方式	交流式
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	72W
外形寸法	約H227×W62×D85mm (スタンド含まず)
製品質量	約420g (付属品含まず)
本体素材	ABS樹脂、サファイアクリスタルなど

## 保証とアフターサービス

### 保証期間

保証期間はご購入日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、ご購入の販売店、またはWEBサイトのコンタクトページへお問い合わせください。補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理をいたします。

### 修理を依頼されるときは

- お買い上げになってから1年間は、保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。本品と保証書をご持参のうえ、ご購入の販売店、またはWEBサイトのコンタクトページに修理をご依頼ください。
- 保証期間(1年間)が過ぎているとき、保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店、またWEBサイトのコンタクトページまでお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

### 保証書について

保証書はご購入日から1年間、無償修理規程に基づいて無償修理をお約束するものです。保証書はこの取扱説明書の中に記載されております。保証書は必ず「ご購入日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

※ご記入のない場合は無効となります。

## 無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。(消耗品、付属品を除く)
  - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
  - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、WEBサイトのコンタクトページへお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
  - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
  - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
  - ホ) 保証書の提示がない場合
  - ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
  - チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
  - リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
  - ヌ) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

## 無償修理規定(続き)

- 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 保証書

商品名	STELLA BEAUTE IPL光美容器	
	お名前	
	電話番号	
	ご住所	〒      ー
	店名	
	電話番号	
	住所	〒      ー
お買い上げ日	年      月      日	
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※消耗品及び付属品を除く	

### 製造・販売

Kirala Co.,Ltd.  
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kirala ビル  
<https://www.stellabeaute.jp/>

