

取扱説明書

STELLA BEAUTE

IPL & LED 光美容器



保証書在中

このたびは、STELLA BEAUTE 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。





- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目次




安全上のご注意	3~5
各部の名称	6~7
お手入れ前の準備	8
お手入れできる部位と使用時間の目安	9
使用方法	10~12
その他便利機能	13
使用後のお願い	13
本製品のメンテナンス	14
お手入れの頻度	15
故障かなと思ったら	16
肌トラブルについて	17
付属品・製品仕様	18
保証とアフターサービス	19
無償修理規定	20~21

安全上のご注意

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性があるとして想定される内容
 注意	使用者が傷害を負う危険が想定される場合、及び物的損害の発生が想定される内容 ※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。
	「してはいけない内容」
	「実行しなければならない内容」

警告


-  ● 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しない
 - ・ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル
 - ・人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器
 - ・その他、体内に装着する医療用電子機器
(事故や体調不良の原因)
- 肌以外に照射しない
(事故や故障の原因)
- 目に直接照射しない
- 暗い場所では使用しない
(過度の刺激で目を傷める原因)
-  ● 顔に照射する時は目を閉じる
(機器から照射される強い可視および不可視の光で目を傷める原因)
-  ● ACアダプターや電源コードが破損・故障した状態やホコリやゴミ、水分が付着した状態では使用しない
 - 本製品は防水仕様ではないため、濡れた手で使用したり、水のかかりやすい場所では使用しない
(感電・ショートによる火災などの原因)

安全上のご注意(続き)

警告

-  ● ACアダプターや電源コードは本製品に付属する専用の物を使用し、使用電圧などは必ず本書記載に従う
 - ・必ず 100 ~ 240V で使用し、コンセントは根元まで確実に差し込む。
-  ● 本製品を通电させたまま長時間放置しない
(事故や誤作動トラブルの原因)
- 使用中は通気口を手や体でふさがない
(火災ややけどの原因)

注意

-  ● 下記に当てはまる方には本製品を使用しない
 - ・生理中、妊娠中や授乳中の方
(ホルモンバランスが不安定のため肌トラブルの原因)
 - ・アトピー性皮膚炎や湿疹、ヘルペス、ケロイドを起こしやすい方
 - ・皮膚知覚障害のある方や、太陽光で肌が特に荒れやすい方
 - ・体調のすぐれない方や、薬を服用している方
(服用される薬によって肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因)
 - ・成長期の子供
(やけどや肌トラブルの原因)
 - ※ 18歳未満の場合は保護者が本書を読み、正しい使いかた・禁止事項を指導する
 - ※ 個人によって差があるが、一般的な目安としては子供の成長期は12歳まで
- 下記の箇所には本製品を使用しない
 - ・目や目の周り、耳、唇、頭、へそ、乳首、乳輪、粘膜や性器
 - ・日焼けした肌やかさぶた、傷、湿疹、肝斑(かんぱん)、ほくろなどの色素の濃い箇所
 - ・タトゥー・入れ墨、ボディペイントやアートメイクをしている箇所
 - ・ボディクリームやフェイスクリーム、制汗剤、日焼け止め、香水などを塗っている箇所
 - ・シリコン注入箇所やピアス、ボディピアスのある箇所
 - ・炎症を起こしている箇所や、血管腫や美容整形をしている箇所

安全上のご注意(続き)


⚠ 注意

- ❗ ● 使用する箇所のアクセサリーや貴金属は必ず外す
- 使用頻度や使用部位は本書の案内に従う
(やけどや肌トラブルの原因)
- 素肌(メイクや日焼け止め、香水などを洗い流した状態で基礎化粧品を塗布前)に使用する
(肌トラブルの原因)
- セーフティー機能搭載のため、照射口を肌にしっかりと当てる
(照射されない原因)
- ⊘ ● 本製品の本来の用途(ムダ毛ケア、美肌ケア、アクネケア)以外の用途で使用したり、異なる手順で操作をしない
(事故や体調不良が生じる原因)
- 同じ部位にムダ毛ケアモード、アクネケアモード、美肌ケアモードを同時に使用しない
(やけどや肌トラブルの原因)
- 日焼けをしてから約1週間は本製品を使用しない
- 本製品を使用後、しばらく痛みや不調が続いたり、発疹、かゆみ等、皮膚に異常が現れた場合は使用を中止し、医師の診療を受ける
(肌トラブルや症状悪化の原因)

各部の名称

本体側(光美容器)


スタンド側

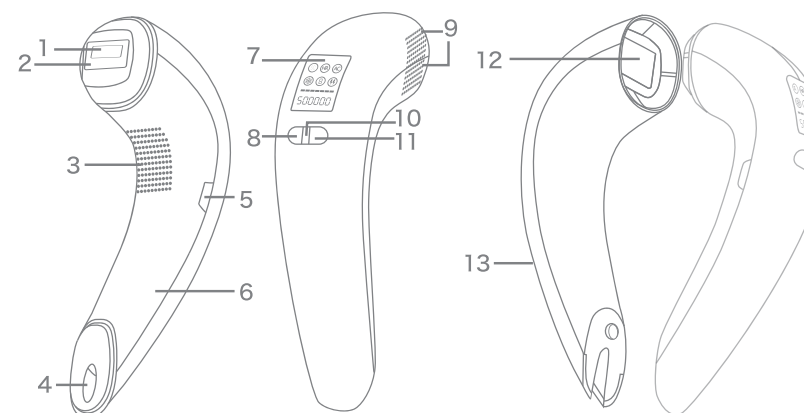

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. IPL 照射口 / グリーン LED | 8. 電源ボタン(照射レベル設定) |
| 2. 冷却プレート(サファイアクリスタル) | 9. 換気口(排出) |
| 3. 換気口(吸入) | 10. 肌色検知センサー / ランプ [赤] |
| 4. AC アダプター差込口 | 11. モード切替ボタン(冷却 ON/OFF) |
| 5. 照射ボタン | 12. LED クリーンライト |
| 6. グリップ | 13. クリーンシステムスタンド |
| 7. 液晶ディスプレイ | ※単 4 電池 2 本使用 |

各部の名称(続き)


液晶ディスプレイ

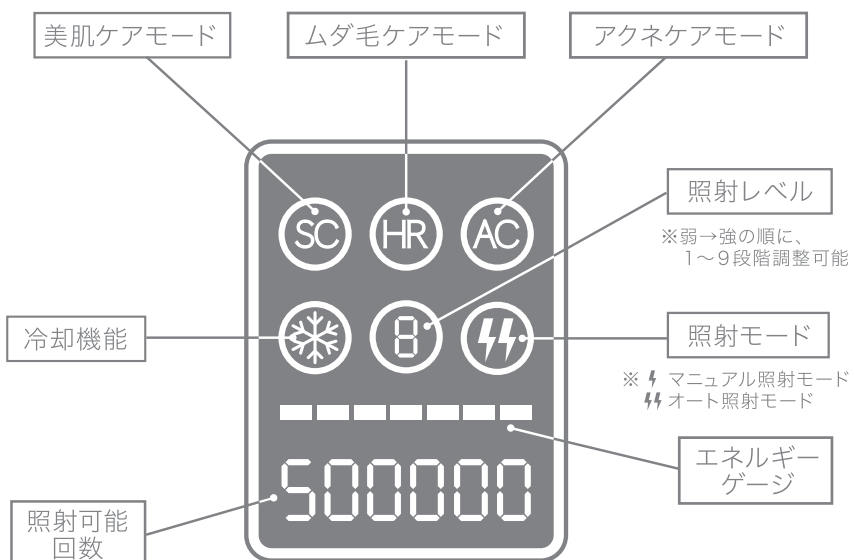


※初期状態の照射可能回数表示は50万回。
 ※本体起動後、照射中は照射回数がカウントされ、ディスプレイに表示されます。

AC アダプター

電源コード

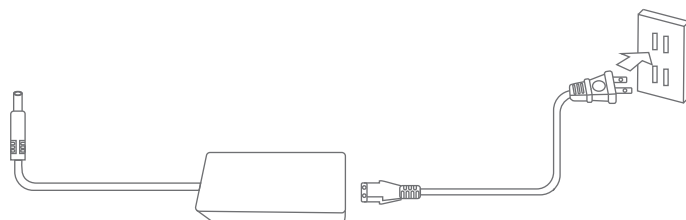

お手入れ前の準備

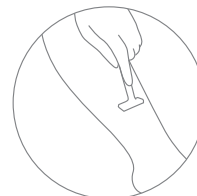

- お肌のお手入れ箇所を清潔にし、シェーバーで毛を剃った状態でご使用ください。なお、香水、乳液、クリームなどが残っていない状態にしてください。
- 照射面の汚れやホコリ、毛などは必ずきれいに拭きとり、付着物がないことを確認してから照射してください。付着物が残った状態でのご使用は、肌トラブルや製品の故障・劣化等の原因となります。


ご使用のポイント

- ① ワキのお手入れ
 お手入れする前に、ワキにつけている制汗剤や香水、その他化粧品などが残っていない状態にしてください。シワがある部分は指先で伸ばしてご使用ください。
- ② VIOゾーンのお手入れ
 色素沈着や色が黒ずんでいる箇所は照射レベルを下げてご使用ください。製品に体が慣れるまでは照射レベル1でのご使用をおすすめします。
- ③ 手と足のお手入れ
 関節部分など丸みのある部位はなるべく伸ばし、しっかり照射面を密着させてご使用ください。

※ 照射の際に、照射口を肌に密着させ、押し当ててください。
 照射モード (⚡・⚡⚡) サインが点滅し、かつエネルギーゲージサインが全て点灯している状態でないと照射できません。

お手入れできる部位と使用時間の目安

※使用時間や照射回数はいくまで目安となります。
 ※一度のケアで同じ箇所への複数回の照射をしないでください。
 ※本製品は男性もお使いいただけます。

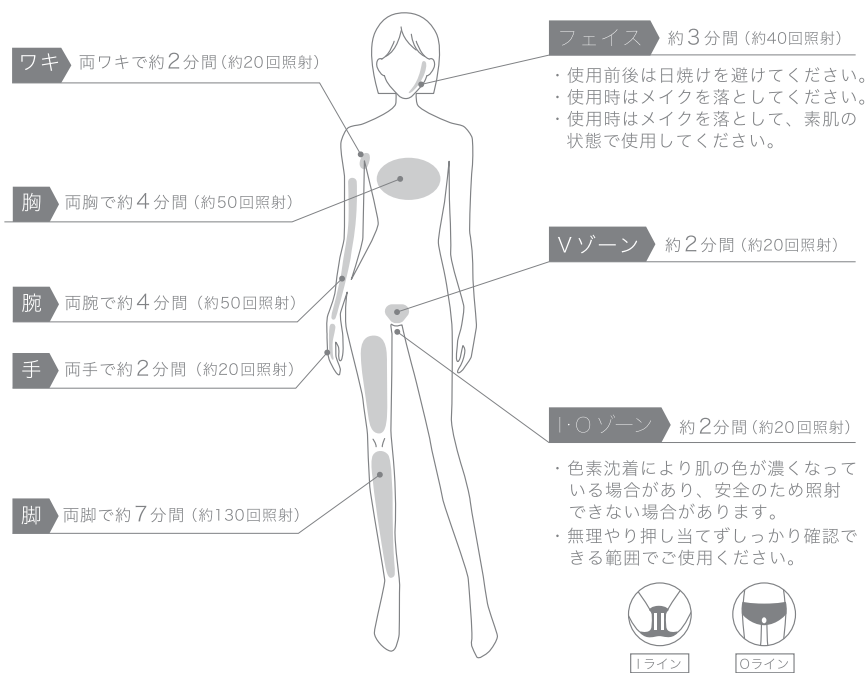

次に該当する箇所へのご使用はできません

傷痕、やけど痕のある箇所、治療中の傷がある部位、色が濃い部位、目の周り、しもやけ跡、ほくろ、タトゥー・入れ墨のある部位、眉毛、髪の毛、日焼けした箇所、やけどしている箇所。


※使用后24時間以内は、なるべく紫外線に当てないでください。
 ※照射面から出る光は決して近くで直視しないでください。

使用方法

初めてのご使用時やしばらく使用しなかった場合

■パッチテスト

初めて使用するときや、しばらく使用せず久しぶりにご使用になる場合、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。

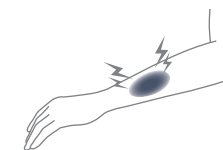

電源を ON にし肌色検知した後、電源ボタンを押すたびに照射レベルが切り替わるので、照射レベル1からテストをしてください。

肌に強い痛みや、赤くなった状態が2日以上続く場合は使用を中止してください。

各モードの紹介

HR：ムダ毛ケアモード + グリーン LED

多くのサロンで採用されている「IPLフラッシュ式」を採用。顔からVIO、脚先まで、全身のムダ毛ケアに対応します。

SC：美肌ケアモード + グリーン LED

角質層にまで刺激を促し、継続的なご使用で透明感とハリのある美しい肌へ導きます。

AC：アクネケアモード + グリーン LED


気になる箇所に照射。キメを整えることによって、赤みや跡を目立ちにくく健やかな肌へと導きます。

グリーン LED：使用中に全てのモードにおいて、肌と接触した時に、グリーン LED が稼働します。IPL × グリーン LED の照射で肌の表面から深部までケアされ、肌の透明感を引き出します。

※ 本製品は医療機器や永久脱毛機器ではありません。継続的なご使用でムダ毛の目立ちにくい肌を保つことができます。


使用方法(操作手順)

※ 基本的にサングラスの着用は必要ありませんが、照射光が苦手な方はご着用ください。

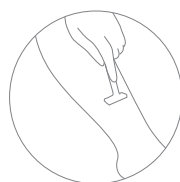


準備

シェーバーや安全カミソリで事前に除毛します。毛の長さは1mm以下にしてください。

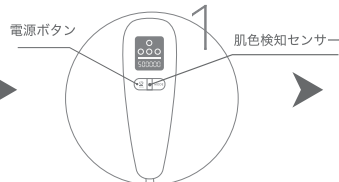

電源 ON

AC アダプターを本体に挿し込み、電源コードをつなぎ、電源ボタンを2秒間長押しで電源ON。

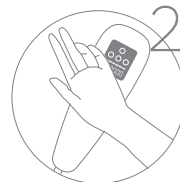


肌色検知

※検知後、照射可能な状態になります。使用前に肌色検知センサー（赤ランプが点滅しているところ）で肌の色を検知します。肌がセンサー全体を覆うようにしっかり当ててください。正しく検知されると、内部のファンが起動し、照射できるようになります。




オート / マニュアル照射

肌色検知後はマニュアル照射モードになっています。側面にある照射ボタンを押して照射していきます。照射ボタンを2秒間長押しすると、スピーディーなケアが可能なオート照射モードに切り替わります。

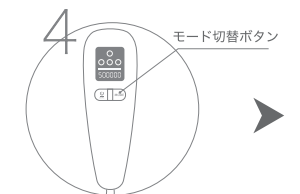


モード切替

モード切替ボタンを押すと、ムダ毛ケア (HR) / アクネケア (AC) / 美肌ケア (SC) モードに切り替えができます。

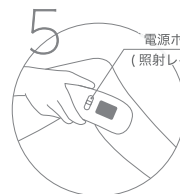

照射レベル

肌色検知結果に応じて、自動で照射レベルを調整します。使用中に電源ボタンを押すと、照射レベル1～9までお好みで調整できます。

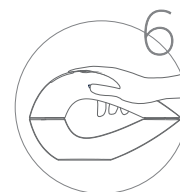

電源 OFF

使用後は電源ボタンを2秒間長押しで電源OFF。30秒間のクールダウン後、停止します。

※ 液晶ディスプレイの30秒カウントダウンは本体を冷却するための設定です。電源コードを抜かず、そのまま30秒お待ちください。

使用方法(操作ボタン)

電源ボタン・照射レベル設定

- ① 電源ボタンを2秒間長押しすると、電源のON/OFFができます。
- ② 電源を入れた後、電源ボタンを短く押すと、照射レベルを1～9段階に切替ができます。
- ③ 電源ボタンを2秒間長押ししてシャットダウンすると、画面に30秒のカウントダウンが表示されます。その間、本体から熱を放出させるためにファンが作動します。カウントダウンが終了すると、本体電源はOFFになります。

モード切替ボタン・冷却機能 ON/OFF

- ① 電源を入れた後、モード切替ボタンを押すと、ムダ毛ケアモード (HR)、アクネケアモード (AC)、美肌ケアモード (SC) に切替ができます。
- ② 電源を入れた後、モード切替ボタンを2秒間長押しすると、冷却機能のON/OFFができます。

照射ボタン

- ① マニュアル照射モード(⚡と表示)：肌に照射口をあて、照射ボタンを押すと、1回の照射ができます。
- ② オート照射モード(⚡⚡と表示)：肌に照射口をあてると、照射ボタンを押さなくても一定間隔で自動的に照射されます。照射ボタンを2秒間長押しすると、マニュアル照射モードとオート照射モードの切替ができます。

※ 照射の際に、照射口を肌に密着させ、押し当ててください。

照射モード (⚡・⚡⚡)サインが点滅し、かつエネルギーゲージサインが全て点灯している状態でないと照射できません。

その他便利機能

LEDクリーンライト

本製品使用后、本体をスタンドに設置することで、クリーンライトによって清潔さを保ちます。作動時間は2分間です。

- ※ 本体をスタンドに設置後、ライトが2分間点灯します。
- ※ ライトが完全に光らなくなりましたら、電池交換を行ってください。
- ※ クリーンシステムスタンドを使用する前に、底面の透明のフィルムをはがし、付属の単4電池を入れてからご使用ください。

自動電源OFF

本体保護や誤作動を防止するため、電源を入れて5分間操作がない場合、本体は自動的に電源OFFになります。

肌色検知+オート照射レベル設定

肌色検知センサーに肌を押し当てることで、センサーが肌の色を検出し、本体が自動的に肌の色に合わせた照射レベルを設定します。

注意 肌色検知センサーによって肌色の検出をしないと、照射を開始できません。

使用後のお願い

- ご使用直後に、香水や機能性化粧品、スクラブ成分含有の洗顔料・洗浄料・化粧品などをお手入れ部位に使用しないでください。
- ご使用后、24時間程度はなるべく紫外線に当てないでください。外出される場合などは、日焼け止めを活用してください。
- お肌などに異常が発生した場合、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。
- 日焼けした状態で使用すると、肌トラブルの原因となるおそれがあります。本製品を使用中は日焼けをしないようご注意ください。日焼けをした場合は、1週間以上期間を空けてから本製品をご使用ください。
- ムダ毛ケアをした部位を治療や美容整形する場合、また治療後や美容整形後の部位をムダ毛ケアする場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

※ 正しい手順で使用していても、お肌の性質や体質によってはトラブルが発生してしまう可能性があります。お肌に異常が発生した場合は、本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

本製品のメンテナンス

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。

1. 電源を切り、電源プラグを抜いて製品を冷まします。
※照射口は使用中熱くなります。清掃を行う前に必ず冷ましてください。
2. やわらかい布を少量の水で湿らせ、照射口をきれいに拭きます。
注意 本製品は防水仕様ではありません。製品を濡らさないでください。
3. 汚れの状況に応じて、本体を乾いた掃除用クロスで丁寧に拭いてください。
4. 本体照射口をスタンドに置いてください。LEDクリーンシステムが自動的に作動します。
5. 注意事項
 - (1) 本体の汚れは、乾いた布で拭きとってください。落とすにくい汚れは水を含ませた布で拭きとり、その後は水分を十分に拭きとってください。
 - (2) 本製品は防水仕様ではありません。製品を濡らさないでください。故障や事故の原因となります。
 - (3) 研磨材、研磨用洗浄剤、刺激性の薬品などは絶対に使わないでください。
 - (4) 電源コードやACアダプターは絶対に濡らさないでください。
 - (5) 照射口や肌色検知センサーには、傷が付かないようご注意ください。
 - (6) ご使用前後は必ず、照射口の清掃をしてください。

お手入れの頻度

- 最初の2カ月間はおよそ1～2週間ごとにムダ毛ケアをするようにしてください。

注意 ムダ毛ケアは最初の数回だけでなく、継続的にご使用いただくことで、効果を実感していただけます。(効果は部位や個人により異なります。)

- 毛の成長に合わせて定期的にご使用ください。毛が濃い場合は、適度に照射レベルや頻度を上げる必要があります。個人の毛の成長に応じて調整してください。
- 3カ月目以降のお手入れ周期について
 - ①滑らかな肌を維持するには、4～8週間ごとにムダ毛ケアすることをおすすめします。
 - ②体の部位ごとに照射時間とお手入れ周期が異なるため、毛の成長状況を見て判断してください。
- 毎日ご使用する場合、美肌ケアモード・アネケアモードの照射レベル1でのご使用をお勧めいたします。

ムダ毛ケアモード + グリーン LED		
使用する部位	最初の2カ月	3カ月目以降
ボディ	1週間に1回	2週間に1回
VIOゾーン	2週間に1回	4～8週間に1回
フェイス (女性)	2週間に1回	4～8週間に1回
ヒゲ (男性)	3日に1回	
美肌ケアモード・アネケアモード + グリーン LED		
フェイス (男性・女性)	3日に1回 照射レベル1で毎日使用可能	

※ 過度な使用はかえって肌によくありませんので、ご使用する前に必ずお肌の状態を確認してください。

お手入れの頻度(続き)

- 使い始めや久しぶりにご使用いただく場合は、最初の2カ月と同じお手入れ頻度をおすすめします。
- 一度お手入れをした後は、次の照射まで最低2日空けてください。過度のお手入れは肌トラブルの原因となるおそれがあります。

故障かなと思ったら

以下を実行しても直らないときは修理を依頼してください。

事例	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードやACアダプターはしっかり接続されていますか？ →コード類を再度接続しなおしてください。
照射できない	<ul style="list-style-type: none"> ・照射口が肌にしっかり押しあてられていますか？ →照射口を肌に密着させ、肌に垂直に押しあてた状態で照射してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・照射口が肌以外にあたっていないか？ →照射口に異物がないことを確認してから、照射してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・肌色検知は完了していますか？ →電源を入れただけでは照射できません。 必ず肌色検知センサーで肌色検知を行ってください。検知後、本体内部のファンが起動し、照射できる状態になります。
本体から音がする	<ul style="list-style-type: none"> ・エネルギーゲージサインが全て点灯していますか？ →1回の照射が完了すると、エネルギーゲージサインが徐々に点灯していきます。全て点灯後に次の照射が可能になります。
本体から音がする	<ul style="list-style-type: none"> ・本体に内蔵されているファンの動作音です。異常ではありません。

肌トラブルについて

肌の反応	対処方法
照射中や照射直後 照射した部位に熱 さや痛みを感じる	・ 使用できない部位に使用していませんか？ →事前に使用禁止部位をご確認ください。(「安全上のご注意」参照)
	・ 強すぎる照射レベルに設定していませんか？ →電源/照射レベルボタンを押して照射レベルを下げてください。
	・ 同じ箇所に何度も照射していませんか？
照射中や照射後、 肌に赤みができる	体質や体調によっては、肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。直ちに使用を中止し、肌を冷却・保湿してください。使用後に肌の赤みが48時間経っても消えない場合、皮膚科の医師に相談してください。
照射直後に、焦げ たニオイがする	・照射する部位にムダ毛が残っていますか？ →照射時のIPL光でムダ毛に熱が加わり、焦げたにおいがする場合があります。しっかり除毛してからご使用ください。製品本体からニオイがする場合、直ちに使用を中止して本体の電源をオフにしてください。

稀な肌の反応	対処方法
照射後、 腫れや赤みが2～3日 たっても消えない	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。
照射中や照射後、 明るくなったり、暗くなる など肌の色が変わる	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。
照射中や照射後、 火傷や水疱の反応が あらわれる	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。

付属品・製品仕様

付属品

本体	1
スタンド(台座)	1
ACアダプター	1
電源コード	1
取扱説明書	1
簡単使い方ガイド	1
会員登録カード	1
単4電池	2
収納ケース	1

製品仕様

モデル名	SB-IFD03-WH、SB-IFD03-GR
電源方式	交流式
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	72W
外形寸法	約H227×W62×D85mm (スタンド含まず)
製品質量	約450g (付属品含まず)
本体素材	ABS樹脂、サファイアクリスタルなど

保証とアフターサービス

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または L' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボータ）へお問い合わせください。補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理をいたします。

修理を依頼されるときは

■ お買い上げになってから1年間は、保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。本品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、または L' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボータ）に修理をご依頼ください。

■ 保証期間(1年間)が過ぎているとき、保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、また L' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボータ）までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

保証書について

保証書はお買い上げ日から1年間、無償修理規程に基づいて無償修理をお約束するものです。保証書はこの取扱説明書の中に記載されております。保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

※ご記入のない場合は無効となります。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。(消耗品、付属品を除く)
 - (1) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - (2) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、L' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラボータ）へお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - (5) 保証書の提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (7) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - (8) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - (9) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷
 - (10) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

無償修理規定(続き)

- 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に関するお問い合わせは
L'EMBELLIR STELLA BEAUTE
(ランベリーステラボータ)まで
TEL 0570-099-901
受付時間 9:00~17:00
(年末年始等特定日除く)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

保証書

商品名	STELLA BEAUTE IPL & LED 光美容器	
お客様	お名前	
	電話番号	
	ご住所	〒 ー
販売店	店名	
	電話番号	
	住所	〒 ー
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※消耗品及び付属品を除く	

製造・販売

Kirala Co.,Ltd.
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kirala ビル
<https://www.stellabeaute.jp/>

