

## ディスプレイの見方



ムダ毛ケアを行う前に、肌色検知を行う必要があります。

本製品はセーフティ機能搭載のため、機器が肌を検知していない状態では照射できません。

- ① 肌色検知センサーを肌にしっかり当ててください。  
センサーを肌に対して垂直にし、センサー全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。
- ② 肌が正しく検知されると、本体内部のファンが「ブーン」と周りはじめ（故障ではありません）、照射ができるようになります。  
指示ランプの赤色 LED が消え、液晶ディスプレイに推奨の照射レベルが表示されます。

### 毛周期に合わせたお手入れ頻度の目安

ムダ毛ケアモード + グリーン LED		
使用する部位	最初の 2 カ月	→ 3 カ月目以降
ボディ	1 週間に 1 回	2 週間に 1 回
VIO ゾーン	2 週間に 1 回	4~8 週間に 1 回
フェイス (女性)	2 週間に 1 回	4~8 週間に 1 回
ヒゲ (男性)	3 日に 1 回	

美肌ケアモード・アクネケアモード + グリーン LED		
フェイス (男性・女性)	3 日に 1 回	照射レベル 1 で毎日使用可能

- 各モードの照射レベル 2~9 では、3 日ごとに使用してください。グリーン LED ケアを毎日ご使用する場合、美肌ケアモード・アクネケアモードの照射レベル 1 でのご使用をお勧めいたします。
- 使い始めや久しぶりにご使用いただく場合は、最初の 2 カ月と同じお手入れ頻度をオススメします。
- 同じ部位にてムダ毛ケアモード、美肌ケアモード、アクネケアモードを同時に使用しないでください。同じ部位に他のモードを使用する場合、最低 2 日空けてご使用ください。

**STELLA**  
BEAUTE

# STELLA

BEAUTE


## IPL & LED 光美容器 簡単使い方ガイド

### 初めてのご使用時やしばらく使用しなかった場合

■パッチテスト  
初めて使用する時や、しばらく使用せず久しぶりにご使用になる場合、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。



電源を ON にし肌色検知した後、電源ボタンを押すたびに照射レベルが切り替わるので、照射レベル1からテストをしてください。

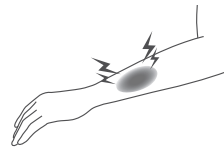

肌に強い痛みや、赤くなった状態が2日以上続く場合は使用を中止してください。

### お手入れできる部位と使用時間の目安

全てのモードにおいて、グリーンLEDが同時に稼働します。

※使用時間や照射回数はあくまで目安となります。  
※本製品は男性でもお使いいただけます。  
※一度のケアで同じ箇所への複数回の照射をしないでください。

**ワキ** 両ワキで約2分間(約20回照射)

**胸** 両胸で約4分間(約50回照射)

**腕** 両腕で約4分間(約50回照射)

**手** 両手で約2分間(約20回照射)

**脚** 両脚で約7分間(約130回照射)

**フェイス** 約3分間(約40回照射)

・使用前後は日焼けを避けてください。  
・使用時はメイクを落としてください。  
・使用時はメイクを落として、素肌の状態で使用してください。

**Vゾーン** 約2分間(約20回照射)

**I・Oゾーン** 約2分間(約20回照射)


・色素沈着により肌の色が濃くなっている場合があります。安全のため照射できない場合があります。  
・無理やり押し当てずしっかり確認できる範囲で使用してください。



### ムダ毛ケアモードの使い方

グリーンLEDによる透明肌ケアも同時に行います。

※基本的にサングラスの着用は必要ありませんが、照射光が苦手な方はご着用ください。

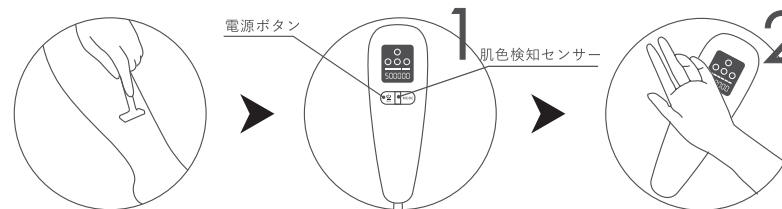

#### 準備


シェーバーや安全カミソリで事前に除毛します。毛の長さは1mm以下にしてください。

#### 電源 ON

ACアダプターを本体に挿し込み、電源コードをつなぎ、電源ボタンを2秒間長押しで電源ON。

#### 肌色検知

※検知後、照射可能な状態になります。使用前に肌色検知センサー（赤ランプが点滅しているところ）で肌の色を検知します。肌がセンサー全体を覆うようにしっかり当ててください。正しく検知されると、内部のファンが起動し、照射できるようになります。

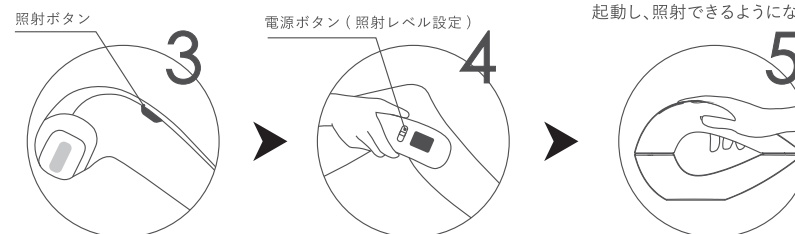

#### オート / マニュアル照射

肌色検知後はマニュアル照射モードになっています。側面にある照射ボタンを押して照射していきます。照射ボタンを2秒間長押しすると、スピーディーなケアが可能なオート照射モードに切り替わります。

※セーフティ機能搭載のため、照射口が肌にしっかりと当たらないと照射されません。

#### 照射レベル

肌色検知結果に応じて、自動で照射レベルを調整します。使用中に電源ボタンを押すと、照射レベル1～9までお好みで調整できます。

#### 電源 OFF

使用後は電源ボタンを2秒間長押しで電源OFF。30秒間のクールダウン後、停止します。  
※液晶ディスプレイの30秒カウントダウンは本体を冷却するための設定です。電源コードを抜かず、そのまま30秒お待ちください。

### 美肌ケアモード、アクネケアモードの使い方

グリーンLEDによる透明肌ケアも同時に行います。

電源を入れ、肌色検知をした後、モード切り替えボタンを押すと、美肌ケア(SC)モード、アクネケア(AC)モードに切り替えることができます。詳細は、取扱説明書をご覧ください。

※使用中の全てのモードにおいて、肌と接触した時に、グリーンLEDが稼働します。

STELLA BEAUTE オフィシャルサイト

<https://www.stellabeaute.jp/>

ブランドサイト



Instagram

