

性能比較

◇ 使える部位別

	薄い毛	うぶ毛	効果	痛み・肌荒れ
STELLA BEAUTE IPL 光美容器	◎	◎	◎ 早い	◎
従来のIPL	◎	△	◎ 早い	△
SSC	○	○	△ 遅い	△
SHR/THR	○	○	△ 遅い	△

◇ 機能スペック


STELLA BEAUTE IPL 光美容器	A 社	B 社	C 社	D 社	
最大照射回数	約50万発	約40万発	約40万発	約100万発	約35万発
ケアできる部位	VIO/顔/全身 背中セルフケア	VIO/顔/全身	VIO/顔/全身	VIO/顔/全身	VIO/顔/全身
冷却機能	◎ サファイアクリスタル 冷却プレート	-	-	-	○
肌色検知センサー	◎	-	-	-	-
その他機能	・美肌ケアモード ・アクネケアモード	-	・美肌ケアモード	-	-



ムダ毛ケアを、どこまでも。

顔・ワキ・腕・脚・背中からVIOまで、
全身※1の徹底的なムダ毛ケアを。

家庭用では最高水準のIPL※2照射システムで、
濃い毛・ヒゲだけでなく“うぶ毛”のケアも。
VIOにも対応し、ひとりで背中からのケアも簡単に。
また、「オート照射モード」なら、
最速0.5秒間隔の時短ケアも可能です。

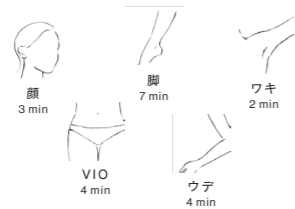

※1 体の部位や肌の状態により、使用できない箇所があります。本製品は、医療機器や永久脱毛機器ではありませんが、継続的なご利用で、ムダ毛の目立ちにくい肌を保つことができます。
※2 IPL (インテンシブ・パルス・ライト) とは、医療現場でも使用される有害な紫外線をカットした可視光線の束で、幅の広い波長を持っていることが特徴です。

クリニックのように、美しく。

STELLAフォトトリートで叶える、
プロ並みの本格的な美肌ケアを。

幅広い波長の特殊光 (510~1200nm) で、
さまざまな肌トラブルに効果的な
「STELLAフォトトリート」。
角質層まで刺激を促す「美肌ケアモード」や、
赤み・跡などに「アクネケアモード」を使えば、
本格的な美肌も叶えられます。

[Two Modes]

美肌を叶える2つのモード

① 美肌ケアモード

角質層にまで刺激を促し、継続的に使うことで透明感とハリのある美しい肌へと導く。

② アクネケアモード

赤み・跡などの気になる箇所に照射することで、キメを整えて目立ちにくく健やかな肌へと導く。



冷たさは、やさしさ。

想像以上に肌の痛さ・熱さを抑える※3、
あなた想いな独自の冷却を。

肌を冷やして痛みを抑える「冷却アイスプレート」と、
広い面積を冷却する「サファイアクリスタル」による、
「Wアイスプロテクション」を搭載。
また、痛みを感じにくい波長の光で、
ムダ毛ケアのストレスを軽減します。



[Feature]

広い面積を冷却する
「サファイアクリスタル」

他社製品


STELLA BEAUTE
IPL光美容器



サファイアクリスタルとは

人工サファイアの粉末を溶かし結晶化した素材。天然サファイアと同じくモース硬度は9。高級時計の風防ケースにも使用されています。

痛みを感じにくい波長の光

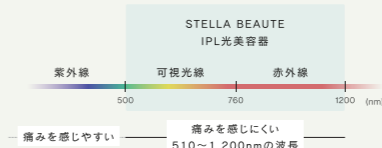

※3 痛みの感じ方には個人差があり、すべての痛みをなくすものではありません。

国内初
テクノロジー

きれいなままと、手軽に。

つねに清潔さを保つ自動システムで、
いつでも使えて気軽なケアを。

本体を付属スタンドに置いておくと、
約2分で照射面を自動でクリーンにする、
「オートクリーンシステム」を搭載。
インテリアにもなじむスタイリッシュなデザインで、
いつでもすぐに使える清潔な状態を保てます。



◇ 使い方


[01]



電源 ON

電源コードをつないでから、電源ボタンを2秒間長押しして電源をONに。

[02]

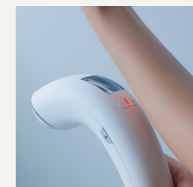

肌色検知

使用前に、肌色検知センサー(赤点減ランプ)で肌の色を検知。肌にしっかり当てて、正しく検知されると照射できるようになります。

[03]



照射

ケアしたいところに、照射ボタンを押して照射。2秒間長押しすれば、時短ケアの「オート照射モード」に切り替わります。

[04]



オートクリーン

照射後は、本体をスタンドへ。オートクリーンシステム(LED除菌)で、照射面を自動でクリーニングして清潔に保ちます。