

取扱説明書

STELLA
BEAUTE



レーザー&EMSリフトブラシ PRO

保証書在中

このたびは、STELLA BEAUTE 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- お客様の安全と正しい使い方のため、「取扱説明書」(本書)を必ずお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



製造・販売

Kirala Co.,Ltd.
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kirala ビル
<https://www.stellabeaute.jp/>

SBLEP01IM05

目次


安全上のご注意	2~5
各部の名称	6
各モードのはたらき	7
ご使用まえの準備	8~9
基本的な使い方	10
各モードの使い方	11~13
使用後のお願い	14
本製品のメンテナンス	14
故障かなと思ったら	15
よくあるご質問	16
電池寿命&廃棄方法	16
付属品・製品仕様	17
保証とアフターサービス	18
無償修理規定	19~20
保証書	21

安全上のご注意

人体への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りください。
誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

 **危険** 使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容


 **警告** 使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容

 **注意** 使用者が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容
※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

 「してはいけない内容」

 「実行しなければならない内容」

危険

 ● 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しないでください。

- ・ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル
- ・人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器
- ・その他、体内に装着する医療用電子機器
(医療用電子機器の誤動作、事故や体調不良の原因)

警告

 ● 下記の箇所には本製品を使用しないでください。

- ・傷口、目、口、唇、鼻の中、耳の中、喉仏、へそ、粘膜部位、乳首、乳輪、性器
- ・過度の日焼け、皮膚炎などお肌に異常のある部位
- ・はれもの、ニキビや吹き出物、湿疹などの部位
- ・外科手術を受けた部位
- ・神経障害、皮膚知覚障害のある部位
- ・交通事故などにより、後遺症がある部位
(肌、身体のトラブルの原因)

安全上のご注意(続き)

警告

 ● 下記に該当する方は使用しないでください。

- ・植毛をされている方
- ・部分かつら (テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど) を装着中の方
(髪の毛がからみつき、髪を傷める原因)

● 下記のような方は必ず医師にご相談の上、使用してください。

- ・頭部に金属(ボルトやプレート、金属糸など)を埋め込んでいる方
- ・顔、頭部をけがしている方、または手術(形成、整形、美容など)をしたことがある方
- ・今までに重い病気を患ったことがある方
- ・骨粗しょう症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど
- ・急性疾患の方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・感染症疾患のある方
- ・有熱性疾患のある方
- ・糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・身体に異常を感じている方
- ・歯の治療、または矯正中の方
- ・その他医療機関で治療中の方

※上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。
(肌、身体のトラブルの原因)

● 使用中または使用後に肌が赤み・はれ・かゆみなどの異常が現れた場合、また体に痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

(肌、身体のトラブルの原因)

● ShapeケアモードにはEMS機能が含まれているため、Shapeケアモードを使用する際は心臓の近くでは使用しないでください。

(肌、身体のトラブルの原因)

● 皮膚が薄い部位、骨の上に長時間使用しないでください。

(肌、身体のトラブルの原因)

● 本製品は金属アレルギーに配慮した素材を使用しておりますが、個人差がございますので、パッチテストを実施した上でご使用ください。

(肌トラブルの原因)

安全上のご注意(続き)



警告

● 本製品の取り扱いに関し、下記の内容を必ずお守りください。

- ・ 充電式電池内蔵のため、火中投入・加熱および高温での充電使用・放置保管はしないでください。
- ・ 重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 不安定な場所に置いたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ・ 分解や修理、改造をしないでください。
- ・ 防水仕様ではありませんので、浴室や浴槽、シャワー室、洗面台または水の入った容器の近くで使用したり、充電したりしないでください。
- ・ 水につけたり、かけたり、水洗いしたりしないでください。
- ・ 異臭、異常発熱した時は使用しないでください。
破損・発火のおそれがあります。
- ・ 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
(感電、ショート、発熱、発火、破裂による火災などの原因)

● 電源・充電ケーブルの取り扱いに関し、下記の内容を必ずお守りください。

- ・ 充電ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
- ・ コネクター部分を接続する際は、まっすぐ挿入してください。
- ・ 充電ケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- ・ ぬれた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
- ・ 充電ケーブルは水につけたり、水洗いしたりしないでください。また、風呂・シャワー室など水回りで使用・充電しないでください。
- ・ 充電ケーブルを傷つけたり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重い物を載せたり、引っばったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- ・ 付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。
- ・ ブラシピンや電極バーに充電ケーブルや金属類を接触させないでください。
- ・ 汚れ、ほこりなどは乾いた布で拭き、定期的に清掃してください。
- ・ 使用しないとき、清掃のときは必ず電源を切って、充電ケーブルをコンセントからぬいてください。
- ・ 万が一、異常が発生したら直ちに電源を切ってください。
- ・ 内蔵電池が漏液して、液が目に入った場合、擦らずに水道水などきれいな水で十分に洗ってください。
(感電・ショートによる火災などの原因、またはけがの恐れ)
(お肌、頭皮、身体を傷める原因)

安全上のご注意(続き)



警告

● 次のような場所で本製品の使用・保管はしないでください。

- ・ ほこりの多い場所
- ・ 油煙、湯気の当たる場所
- ・ 高温、多湿、直射日光の当たる場所(車中、浴室など)
- ・ 強い電波や磁気の発生する場所
- ・ 乳幼児の手の届く場所
- ・ 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
(事故や故障の原因)

● 下記の場合には使用しないでください。

- ・ 使用前に本体の割れ、変形、破損がないかを確認し、破損、または故障した場合は使用しないでください。
- ・ ペットには使用しないでください。
- ・ 他の電気製品(ドライヤーなど)と同時に使用しないでください。
- ・ 電源をONにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させないでください。
- ・ LLLT(低出力レーザー)の光を直接のぞき込まない。
(事故や肌、身体のトラブル、けが、目を傷める原因となります。)




注意

● 本製品の使用に関し、下記の内容を必ずお守りください。

- ・ 初めて使用する際は充電してからご使用ください。
- ・ 初めて使用する前は必ずパッチテストを行い、各モードの強さをレベル弱からご使用ください。
- ・ 頭皮の弱い人は、状態を見ながら使用し、使用の目安を必ずお守りください。
- ・ ピアス、ネックレスなどのアクセサリは外してからご使用ください。
- ・ 顔に使用する際、歯の治療中の方(インプラント、矯正、銀歯など) 歯に詰め物・被せ物がある方は各モードのレベルを調節してご使用ください。
- ・ Shapeケアモードをご使用する際、お肌に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止し、ブラシピンとお肌との間に水などを補充してから、再度ご使用ください。
- ・ 使用時は力を入れて頭皮や肌にこすりつけずに、ゆっくりと移動しながら使用し、1つの部位に長時間使用しないでください。
- ・ 本体の近くでシリコンを配合した化粧品など※ご使用されると、プラズマイオン発生先にシリコンが付着し、プラズマイオンが発生しにくくなります。こまめにブラシのお手入れをしてください。

化粧品など※：ヘアケア商品(枝毛コート液、ヘアムース、ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー

各部の名称

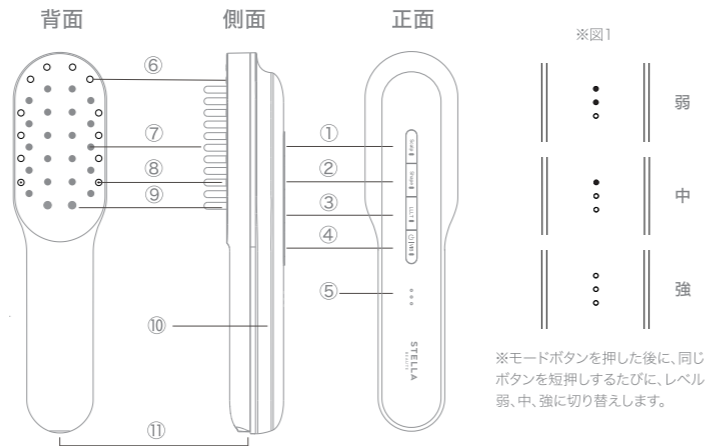

■本体

- ①Scalpケアモードボタン
- ②Shapeケアモードボタン
- ③LLLLTボタン
- ④電源・パイプボタン
- ⑤レベル表示ランプ(弱→中→強)※図1

- ⑥LLLLTライト(低出力レーザー)
- ⑦ブラシピン(電極ピン)
- ⑧プラズマイオン
- ⑨ワイヤレス充電接触点
- ⑩電極バー
- ⑪充電口

■同梱物


スタンド(充電&クリーンシステム)

- ①UV-Cライト
- ②ワイヤレス充電接触点
- ③充電口
- ④滑り止めシリコンリング
- ・取扱説明書(保証書付)
- ・製品保証延長サービスのご案内
- ・充電ケーブル(USB-TypeC)
- ・専用ポーチ

※ACアダプターは付属されていません。

※本製品以外では使用しないでください。

※本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

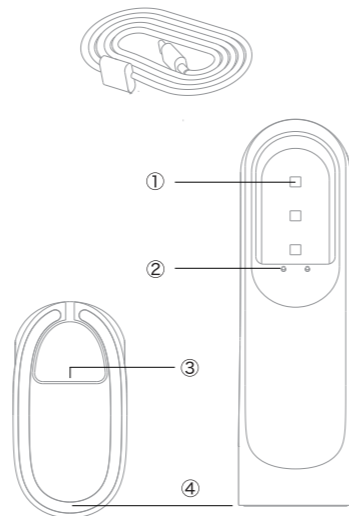

各モードのはたらき

Scalpケアモード

LLLLT(低出力レーザー)+EP(エレクトロポレーション)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

Shapeケアモード(フェイス&ボディ)

LLLLT(低出力レーザー)+EMS(低周波微電流)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

- ・LLLLT(低出力レーザー): 肌や頭皮にアプローチし、環境を整えます。
- ・EMS(低周波微電流): EMSを出力して、表情筋や頭部の筋肉を刺激します。
- ・EP(エレクトロポレーション): 頭皮にヘアケア成分を浸透させます。
- ・RF(高周波): 肌表面の水分に反応し、肌をじんわりと温めます。
- ・VIB(バイブレーション): 皮膚や筋肉に微弱な振動を与え、心地よい感覚を与えます。
- ・テラヘルツ: 肌のハリと潤いを維持するのに役立ちます。
- ・プラズマイオン: 乾燥した髪の静電気を抑制し、キューティクルを整える効果が期待できます。

※各モードにおいて、プラズマイオンとテラヘルツは常に発生しています。

※各モードにおいて、LLLLT/バイブレーションON・OFFの切替ができます。

※LLLLTをONにした場合、ScalpケアモードではLLLLTライトは点灯となりますが、Shapeケアモードでは点滅となります。

■他の便利機能

自動感知センサー

本体が肌から離れたことをセンサーが感知し、2秒後にRF、VIBとLLLLTの出力を自動停止する安全設計となっています。

※プラズマイオン、テラヘルツ、EMS、EPは本体(ブラシピン)が肌から離れた瞬間に、出力を自動停止します。

自動電源OFF機能

本製品は、モードを選択した時から10分が経過すると自動で電源OFFになります。

充電&クリーンシステム

本製品を使用後、本体をスタンドに設置することで、充電しながらUV-Cライトによって清潔さを保ちます。作動時間は2分間です。

※本体をスタンドに設置後、ライトが2分間点灯します。

ご使用まえの準備

■充電する


①スタンドを利用する

1. 充電ケーブル(USB-TypeC)とスタンドを接続する
2. コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む
3. 本体の充電接触点とスタンドの充電接触点が接触するように、スタンドにしっかりとかける。

②充電ケーブルを利用する

1. 充電ケーブル(USB-TypeC)と本体を接続する
2. コンセントにACアダプターをしっかりと差し込む

※本体充電中に倒れないように横にして置いてください。

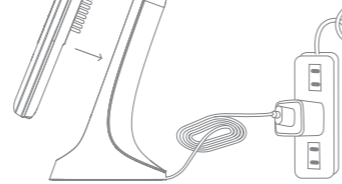


充電不足	提示音が「ピーピーピーピー」と5回鳴って、レベル表示ランプが全て5回点滅
充電中	レベル表示ランプが弱→強の順番で点滅
充電完了時	レベル表示ランプが全て常時点灯

※ACアダプターは同梱されておりません。お手持ちのACアダプターをご使用する前に、定格電源を確認してください。(本製品はDC3.7V 2.8A)

※充電中は使用できません。

■パッチテストをする

化粧品(ジェルなど)と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。

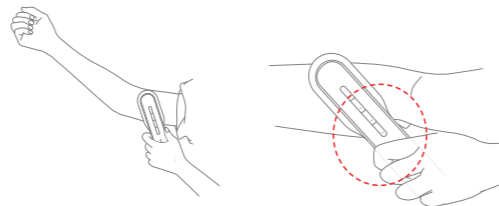

- ①パッチテストを行う部位(二の腕の内側)を石鹸で洗い、タオルで拭き取ってください。
- ②使用する化粧品(ジェルなど)を洗った部位に薄く付けてください。
- ③電源を入れ、Shapeケアモード・パイプレーションONに設定し、約1分後にブラシを塗布部に動かしながら約30秒間当ててください。
- ④化粧品をふき取り、48時間後にお肌の状態を確認してください。
※48時間内にお肌に痛み・赤み・ほてりなどの異常を感じた場合はご使用を中止してください。

ご使用まえの準備(続き)

■本製品は、頭・顔・体にご使用いただける家庭用美容機器です。お手入れ前に以下を必ずお読みになってからご使用ください。

ご準備

- ・顔に使用するときには、必ずメイクを落としてからご使用ください。
- ・頭皮やお肌を清潔にした状態でご使用ください。
- ・頭皮やお肌にニキビや吹き出物などの異常がないことを確認した上でご使用ください。

ご注意

- ・頭皮やお肌に異常がある部分には使用しないでください。
- ・使用中に頭皮やお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

お手入れの目安

モード	Scalp	Shape
使用部位	スカルプ(頭皮)	フェイス(顔)・ボディ(体)
使用時間	約5分~10分	
使用頻度	毎日	週に2~3回
併用可能な化粧品 ヘアケアアイテム ※塗らずにそのままでも ご使用頂けます。	育毛剤などの ヘアケア剤	ジェル、化粧水

- ・1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。
- ・翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。
- ※あくまでも目安です。頭皮やお肌の状態を見ながらご使用ください。
- ※過度な使用は頭皮やお肌を傷める原因となります。
- ※化粧品・ヘアケアアイテムと併用しない場合にもご使用いただけます。

基本的な使い方

※10分間連続使用時、10分間操作がない場合は、いずれも自動で電源OFFになります。


①準備する

頭皮やお肌を素肌の状態にしてください。メイクを落とした後に、化粧水やジェルを塗ってからご使用ください。




②電源をONにする

電源・パイプボタンを長押し(約2秒)してください。提示音が「ピッピッ」と鳴ると、電源がONになります。

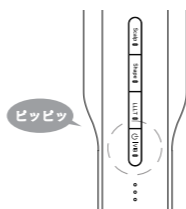


③モードを選ぶ レベルを調整する

使用するモードのボタンを押してください。選択したモードのボタンを押すたびに、レベルが弱・中・強の順番で切り替わります。

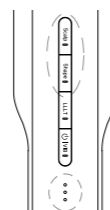


④LLLLT/パイプ レーションのON・OFF

使用中にLLLLTボタンを押すたびにLLLLTのON/OFF切替ができ、電源・パイプボタンを押すたびにパイプレーションのON/OFF切替ができます。

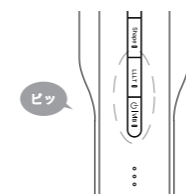


⑤頭皮または お肌にあてる

電極バーを握り、ケアしたい部位にブラシピン全体をあててください。

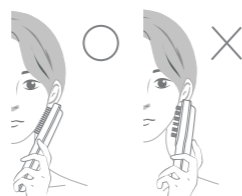

⑥使用終了

電源ボタンを長押し(約2秒)してください。提示音が「ピッピッ」と鳴ると、電源がOFFになります。

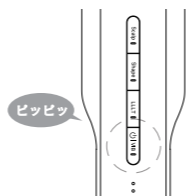

各モードの使い方

■Scalpケアモード

LLLLT(低出力レーザー)+EP(エレクトロポレーション)+RF(高周波)+VIB(バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

「P10」の基本的な使い方を参照し、Scalpケアモードに設定してください。ブラシピン全体が頭皮に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。



お手入れが終わったら、電源・パイプボタンを長押しして電源OFFにしてください。

- ・水や頭皮ケア剤(オイルタイプ以外)などで先に頭皮をぬらすことで、ブラシをスムーズに動かすことができます。
- ・生え際から頭頂部に向かって頭皮をなぞるようにゆっくりご使用ください。頭皮に水分がなくなった場合は、再度頭皮ケア剤(オイルタイプ以外)などを付けてください。
- ・温かい蒸しタオルで頭皮を温めた後や、入浴後に頭皮が温まった状態で使用していただくのがおすすめです。


※ブラシピン全体が頭皮に触れるように、垂直に軽くあててください。
※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとエレクトロポレーション機能が使用できません。
※必ずレベル弱からご使用ください。
※バイブレーションはお好みでご使用ください。

各モードの使い方

■Shapeケアモード (フェイス)


LLLT (低出力レーザー)+EMS (低周波微電流)+RF (高周波)
+VIB (バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

「P10」の基本的な使い方を参照し、Shapeケアモードに設定してください。
ブラシピン全体が顔に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

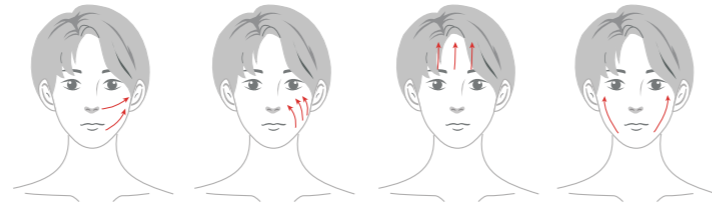

お手入れが終わったら、電源・パイプボタンを長押しして電源をOFFにしてください。

- ※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとEMSが使用できません。
- ※必ずレベル弱からご使用ください。
- ※強く押しあてないでください。
- ※ブラシピン全体が肌に触れるように、垂直に軽くあててください。
- ※バイブレーションはお好みでご使用ください。
- ※フェイスにLLLTを使う際に、LLLTを目に直接照射しないようご注意ください。

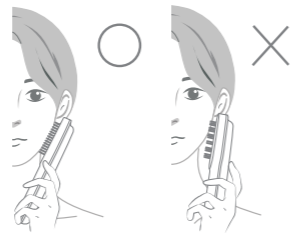

すべてのブラシピンがお肌に触れるようにお肌に垂直に軽くあててください。




使用できない部位：
鼻、耳、くちびる、まぶた、目のまわり(● 部位)

各モードの使い方

■Shapeケアモード (ボディ)

LLLT (低出力レーザー)+EMS (低周波微電流)+RF (高周波)
+VIB (バイブレーション)+テラヘルツ+プラズマイオン

「P10」の基本的な使い方を参照し、Shapeケアモードに設定してください。
ブラシピン全体がイラストにあるケアする部位に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

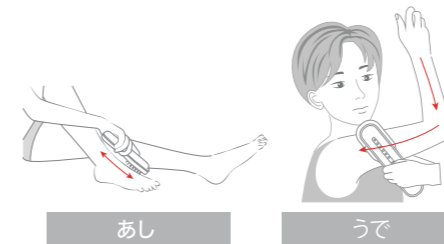

お手入れが終わったら、電源・パイプボタンを長押しして電源をOFFにしてください。

- ※鎖骨にあてないようにすべらせてください。
- ※必ずレベル弱からご使用ください。
- ※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとEMSが使用できません。
- ※バイブレーションはお好みでご使用ください。

使用後のお願い

ご使用直後に、香水や機能性化粧品、スクラブ成分含有の洗顔料・洗浄料・化粧品などをお手入れ部位に使用しないでください。
ご使用后、24時間程度はなるべく紫外線に当てないでください。外出される場合など、日焼け止めを活用してください。
お肌などに異常が発生した場合、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。

本製品のメンテナンス

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1. 電源がOFFになっていることを確認します。
2. 本体についている髪の毛や汚れを取り除いてください。
3. タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れや水分を拭き取ります。
(汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。)

※ 注意事項

- ・使用直後は本体が熱を持つため、電源OFF後は少し時間をおき、本体が熱くないことを確認の上、清掃等を行ってください。
- ・化粧水やゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

故障かなと思ったら

以下を実行しても直らないときはL'EMBELLIR STELLA BEAUTE (ランベリーステラボーテ)までお問い合わせください。

事例	対処方法
電源が入らない	・電源・パイプボタンを2秒以上、長押ししていますか？ ・充電できていますか？
充電して数分しか使えない	・自動OFF機能により、電源を入れて10分以内に操作がない場合、自動電源OFFになります。 ・電池残量が少なくなっています。充電してください。 ・正しく充電できていません。 充電完了はレベル表示ランプの3つの提示灯が常時点灯します。
充電できない	・充電ケーブルはしっかり繋いでいますか？ ・充電中はレベル表示ランプが点滅していますか？
EMSが弱い、あまり感じない	・モードボタンを押して、EMSのレベルを上げてください。 ・しっかり電極バーを握り、頭皮・お肌に当ててください。
EMSが強い、痛すぎる	・モードボタンを押して、EMSのレベルを下げてください。
スムーズに動かない	・頭皮・お肌が乾燥していませんか？ 頭皮・お肌が乾燥していると、動きにくくなります。 →水や化粧水、トリートメントで頭皮・お肌を湿らせてください。

よくあるご質問

事例	対処方法
頭皮以外にも使えますか？	・お顔やボディにも使用可能です。 →事前に使用禁止部位をご確認ください。 (「安全上のご注意」参照)
異なるモードの連続使用はできますか？	・異なるモードの連続使用は可能ですが、1日30分程度のご使用をお勧めします。 ・連続で使用する場合は、お肌の様子を見ながら、5時間以上間隔をあけてください。
浴室で使用できますか？	・浴室でのご使用、保管はおやめください。
頭皮・お肌に赤みが出ました	・力を入れすぎていませんか？ ※ブラシのピンで強くこすると、頭皮・お肌を傷める原因となります。 →頭皮・お肌の上を軽く滑らせるように動かしてください。
	・軽く滑らせても赤みが消えない・ピリピリ感が翌日まで続く場合、直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。

電池寿命&廃棄方法

- ・フル充電を約300回繰り返した後は、本来の蓄電容量の約70%まで低下となります。
- ・内蔵充電電池の寿命は使用・保管状況などにより大きく変化します。充電完了した状態、または内蔵充電電池の減りが少ない状態で再充電を繰り返すと充電電池の寿命が低下することがあります。
- ・内蔵充電電池は消耗品です。保証期間（お買い上げ日から1年間）内は欠陥バッテリーに対する無償対応ができますが、蓄電容量の低下による無償対応は出来かねます。
- ・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、リチウムイオン電池は再利用可能な貴重資源のため、廃棄する際は下記の内容をご確認の上で、リサイクルしてください。
- ・本製品を絶対に分解しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。テープなどで差込口（接続端子）をふさいでから充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。または、自治体のリサイクルルールに従って、指定した場所に設置してある「リサイクルBOX」などにお入れください。

※  このマークを目印にリサイクルしてください。

付属品・製品仕様

製品仕様

モデル名	SB-LEP01-01、SB-LEP01-02
電源方式	充電式
電源・電圧	5V 1A
消費電力	約10W
使用電池	900mAh リチウムイオン電池
充電時間	約2.5時間
動作時間	約1時間 ※Scalp/Shape ケアモードを継続使用する場合
本体寸法	W50mm×D44mm×H205mm
本体質量	約183g
本体素材	PC-ABS（ポリカABS）樹脂、ステンレス
付属品	スタンド（充電&クリーンシステム）、専用ポーチ、充電ケーブル(USB-TypeC)、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内

保証とアフターサービス

保証期間

保証期間はご購入日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、ご購入の販売店、または L'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポーター）へお問い合わせください。

保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理をいたします。

修理を依頼されるときは

■ お買い上げになってから1年間は、保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。本品と保証書をご持参のうえ、ご購入の販売店、またはL'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポーター）に修理をご依頼ください。

■ 保証期間(1年間) 経過後の修理については、ご購入の販売店、またはL'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポーター）までお問い合わせください。有償修理いたします。

保証書について

保証書はご購入日から1年間、無償修理規程に基づいて無償修理をお約束するものです。保証書はこの取扱説明書の中に記載されております。保証書は必ず「ご購入日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。※ご記入のない場合は無効となります。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。（消耗品、付属品を除く）
 - (1) 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - (2) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、L'EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポーター）へお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - (5) 保証書の提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (7) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - (8) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - (9) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷
 - (10) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

無償修理規定(続き)

- 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に関するお問い合わせは
L'EMBELLIR STELLA BEAUTE
(ランベリーステラボーテ)まで

TEL 0570-099-901

受付時間 9:00~17:00
(年末年始等特定日除く)

※携帯電話からもご利用いただけます。

保証書

商品名	レーザー&EMSリフトブラシ PRO		
お客様	お名前		
	電話番号		
	ご住所	〒	—
販売店	店名		
	電話番号		
	住所	〒	—
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※消耗品及び付属品を除く		