


レーザー&EMSリフトブラシ PRO 2.0 使い方ガイド

初めてのご使用时やしばらく使用しなかった場合

■パッチテストをする


化粧品(ジェルなど)と本製品の併用での肌トラブルを防ぐために、必ずパッチテストを行ってください。

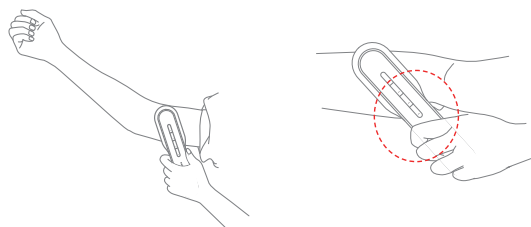


- ①パッチテストを行う部位(二の腕の内側)を石鹸で洗い、タオルで拭き取ってください。
- ②使用する化粧品(ジェルなど)を洗った部位に薄く付けてください。
- ③電源を入れ、SHAPEケアモード・バイブレーションONに設定し、シルクフィットピンを塗布部に当て、動かしながら約30秒間ご使用ください。
- ④化粧品をふき取り、48時間後にお肌の状態を確認してください。

※48時間内にお肌に痛み・赤み・ほてりなどの異常を感じた場合は使用を中止してください。


各部の名称とはたらき

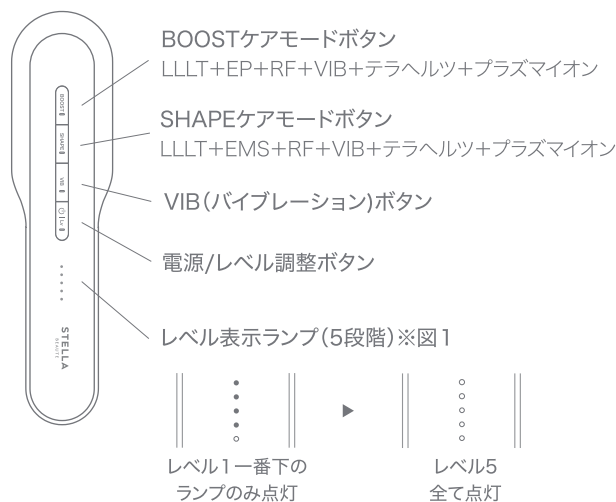

※図1

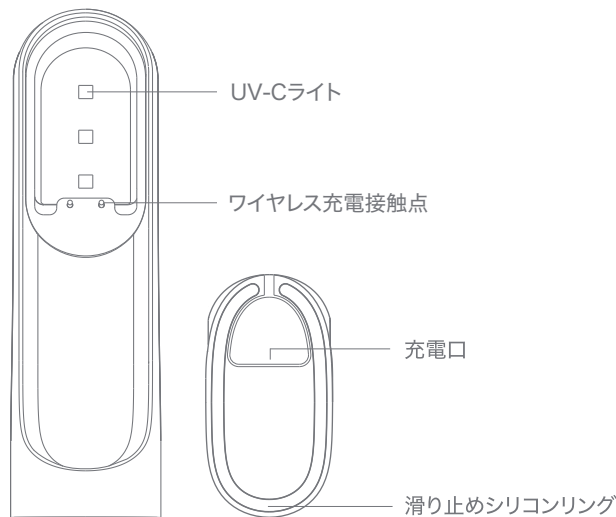

基本的な使い方

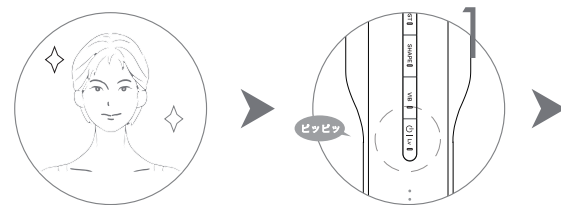


準備する

頭皮やお肌を素肌の状態にしてください。メイクを落とした後に、化粧品やジェルを塗ってからご使用ください。

電源をONにする

電源/レベル調整ボタンを長押し(約2秒)してください。提示音が「ビッピッ」と鳴ると、電源がONになります。

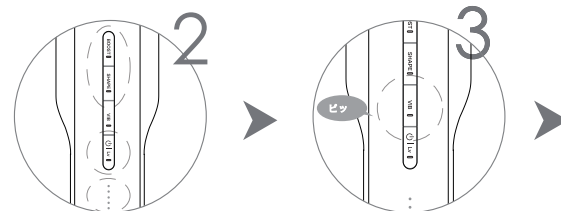


モードを選ぶ レベルを調整する

使用するモードのボタンを押したあと、電源/レベル調整ボタンを押し、レベル(EP/EMS)を調整してください。

バイブレーション のON・OFF

使用中にVIBボタンを押すたびに、バイブレーションのON/OFF切替ができます。

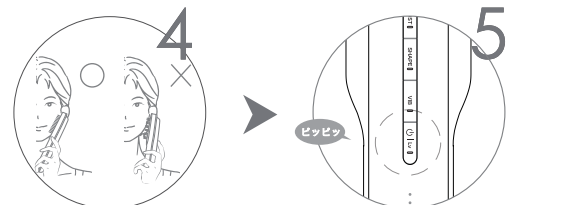

頭皮または お肌にあてる

電極バーを握り、ケアしたい部位にシルクフィットピンを垂直にあててください。

使用終了

電源ボタンを長押し(約2秒)してください。提示音が「ビッピッ」と鳴ると、電源がOFFになります。

各モードの使い方

■スカルプ(BOOSTケアモード)




シルクフィットピン(電極ピン)を頭皮に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

■フェイス(BOOSTケアモード/SHAPEケアモード)



シルクフィットピン(電極ピン)を顔に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

■ボディ(SHAPEケアモード)

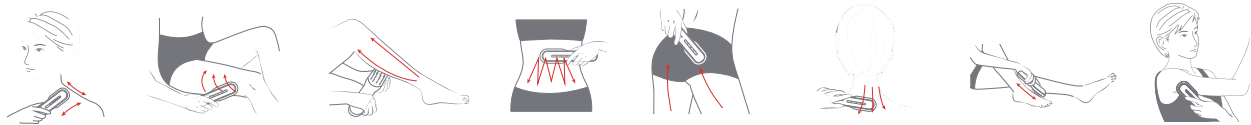

シルクフィットピン(電極ピン)をケアしたい部位に当たるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かしてください。

- ※各モードにおいて、バイブレーションON・OFFの切替ができます。
- ※必ず本体の電極バーに触れるようにしてください。電極バーに触れていないとLLLT、(EP/EMS)、RF、VIBが使用できません。
- ※バイブレーションはお好みでご使用ください。
- ※フェイスにLLLTを使う際に、LLLTを目に直接照射しないようご注意ください。

お手入れの目安

モード	BOOSTケアモード	SHAPEケアモード
使用部位	スカルプ(頭皮)、フェイス(顔)	フェイス(顔)・ボディ(体)
使用時間	約10分	
使用頻度	毎日	
併用可能な化粧品 ヘアケアアイテム	育毛剤、フェイス美容液など	ジェル、化粧水

- ・1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。
- ・翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。
- ※あくまでも目安です。頭皮やお肌の状態を見ながらご使用ください。
- ※過度な使用は頭皮やお肌を傷める原因となります。
- ※化粧品・ヘアケアアイテムと併用しない場合にもご使用いただけます。

STELLA BEAUTE オフィシャルサイト
<https://www.stellabeaute.jp/>

SBLEP02SG01

ブランドサイト



Instagram



STELLA
BEAUTE