

取扱説明書

STELLA
BEAUTE



IPL Flash Device Luna
IPL光美容器 Luna (ルナ)



Kirala Co.,Ltd.
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kiralaビル
<https://www.stellabeaute.jp/>

SBIFL01M01

このたびは、STELLA BEAUTE 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。




- お客様の安全と正しい使い方のため、「取扱説明書」(本書)を必ずお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



目次

安全上のご注意	3~5
各部の名称とはたらき	6~7
お使いになる前に	8~11
使いかた	12~14
使い終わったら	15
よくあるご質問	16~17
製品仕様	18
保証とアフターサービス	19
無償修理規定	20~21


安全上のご注意

人体への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りください。誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。




-  **危険** 使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容
-  **警告** 使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容
-  **注意** 使用者が傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容
※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

-  「してはいけない内容」
-  「実行しなければならない内容」

危険



-  ● 下記の医療用電子機器をお使いの方は本製品を使用しない
 - ・ペースメーカー等の体内埋込式医療用電子機器や、皮下埋込式カテーテル
 - ・人工心肺等の生命維持用医療電子機器や、心電図等の装着型医療電子機器
 - ・その他、体内に装着する医療用電子機器
(医療用電子機器の誤動作、事故や体調不良の原因)

警告


-  ● 肌以外に照射しない
(事故や故障の原因)
- 目に直接照射しない
- 暗い場所では使用しない
(過度の刺激で目を傷める原因)
-  ● 顔に照射する時は目を閉じる
(機器から照射される強い可視および不可視の光で目を傷める原因)
-  ● ACアダプターや電源コードが破損・故障した状態やホコリやゴミ、水分が付着した状態では使用しない
 - 本製品は防水仕様ではないため、濡れた手で使用したり、水のかかりやすい場所では使用しない
 - 本製品は防水仕様ではないため、照射部位にオイルやジェルを塗布して使用しない
(機器の誤動作、故障の原因)

安全上のご注意(続き)

警告

-  ● ACアダプターや電源コードは本製品に付属する専用の物を使用し、使用電圧などは必ず本書記載に従う
 - 必ず100～240Vで使用し、コンセントは根元まで確実に差し込む。
-  ● 本製品を通电させたまま長時間放置しない
(事故や誤作動、トラブルの原因)
- 使用中は通気口を手や体でふさがらない
(火災ややけどの原因)

注意

-  ● 下記に当てはまる方には本製品を使用しない
 - ・生理中や妊娠中、授乳中の方
(ホルモンバランスが不安定のため肌トラブルの原因)
 - ・アトピー性皮膚炎や湿疹、ヘルペス、ケロイドを起こしやすい方
 - ・皮膚知覚障害のある方や、太陽光で肌が特に荒れやすい方
 - ・体調のすぐれない方や、薬を服用している方
(服用される薬によって肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因)
 - ・成長期の子供
(やけどや肌トラブルの原因)
※ 18歳未満の場合は保護者が本書を読み、正しい使いかた・禁止事項を指導する
 - ※ 個人によって差があるが、一般的な目安としては子供の成長期は12歳まで
- 下記の箇所には本製品を使用しない
 - ・目や目の周り、耳、唇、頭、へそ、乳首、乳輪、粘膜や性器
 - ・日焼けした肌やかさぶた、傷、湿疹、肝斑(かんぱん)、ほくろなどの色素の濃い箇所
 - ・タトゥーや入れ墨、ボディペイント、アートメイクをしている箇所
 - ・ボディクリームやフェイスクリーム、制汗剤、日焼け止め、香水などを塗っている箇所
 - ・シリコン注入箇所やピアス、ボディピアスのある箇所
 - ・炎症を起こしている箇所や血管腫、美容整形をしている、または治療している箇所※治療後や美容整形後は、必ずかかりつけの医師に相談のうえ、使用する


安全上のご注意(続き)

⚠ 注意

- ❗ ● 使用する箇所のアクセサリや貴金属は必ず外す
- 使用頻度や使用部位は本書の案内に従う
(やけどや肌トラブルの原因)
- 素肌(メイクや日焼け止め、香水などを洗い流した状態で基礎化粧品を塗布前)に使用する
(肌トラブルの原因)
- セーフティー機能搭載のため、照射口を肌にしっかりと当てる
(照射されない原因)
- ⊘ ● 本製品の本来の用途(ムダ毛ケア、美肌ケア)以外の用途で使用したり、異なる手順で操作をしない
(事故や体調不良が生じる原因)
- 同じ部位にムダ毛ケアモード、美肌ケアモードを同時に使用しない
(やけどや肌トラブルの原因)
- 日焼けをしてから約1週間は本製品を使用しない
- 本製品の使用后、肌に痛みや異常が現れた場合は、ただちに使用を中止する


各部の名称とはたらき

本体(正面/背面/側面)

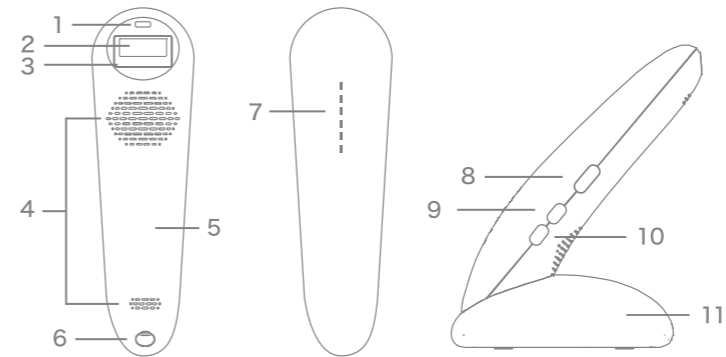

AC アダプター

電源コード

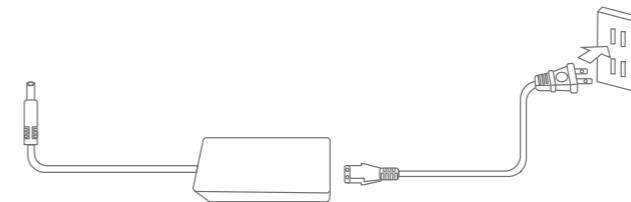

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. 肌色検知センサーランプ [赤] | 7. レベル表示ランプ |
| 2. 照射口 | 8. 照射ボタン
(オート照射 ON/OFF) |
| 3. 冷却プレート
(サファイアクリスタル) | 9. モード切替ボタン
(冷却 ON/OFF) |
| 4. 換気口 | 10. 電源ボタン
(照射レベル調整) |
| 5. グリップ | 11. クリーンシステムスタンド |
| 6. AC アダプター差込口 | |

各部の名称とはたらき(続き)

■はたらき

・安全機能

タッチセンサー

照射口全体がお肌に当たったことを感知すると、照射可能になります。
※レベル表示ランプが点灯状態になれば、照射できます。

オートオフ

電源を入れてから、3分間操作がない場合、自動的に電源がオフになります。

・冷却機能

照射口の冷却プレート(サファイアクリスタル)で肌を冷やします。

・肌色検知機能・自動照射レベル設定

肌色検知センサー[ランプ赤]に肌を押しあてることで、センサーが肌の色を検出し、本体が自動的に肌の色に合わせた照射レベルを設定します。

・オート照射機能

照射ボタンを押さずに、スピーディーなケアができます。

・モード説明

HR:ムダ毛ケアモード

多くのサロンで採用されている「IPLフラッシュ式」を採用。
顔からVIO、足先まで、全身のムダ毛ケアができます。

SC:美肌ケアモード

角質層にまで刺激を促し、継続的なご使用で透明感とハリのある美しい肌へ導きます。

・クリーンシステム


本製品使用后、本体をスタンドに設置することで、クリーンシステムが作動し、照射面の清潔さを保ちます。作動時間は2分間です。

※本製品は医療機器や永久脱毛機器ではありません。
継続的なご使用でムダ毛の目立ちにくい肌を保つことができます。

お使いになる前に

■お手入れできる部位と使用時間の目安

※使用時間や照射回数はあくまで目安となります。(下記はレベル1の場合)
※本製品は男性もお使いいただけます。

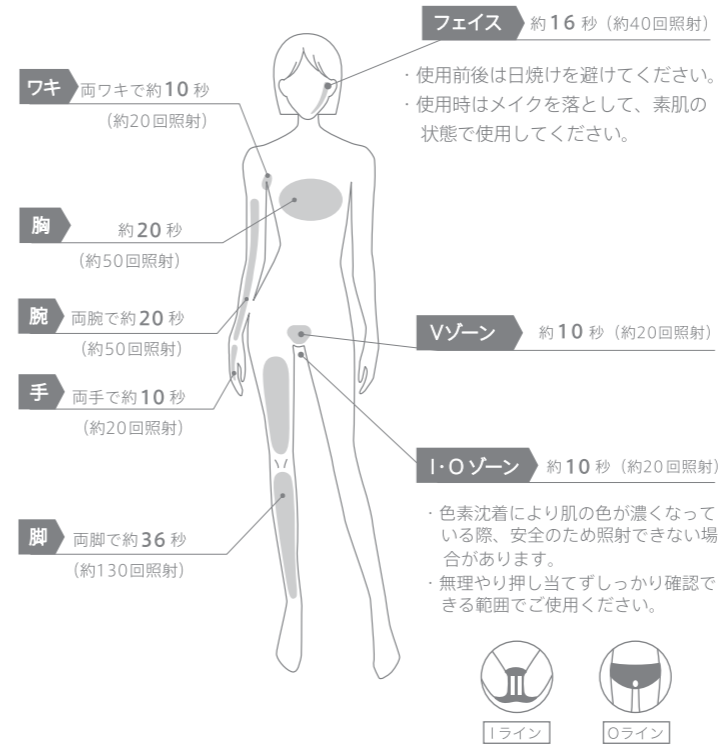

次に該当する箇所へはご使用いただけません

傷痕、やけど痕のある箇所、治療中の傷がある部位、色が濃い部位、目の周り、しもやけ跡、ほくろ、タトゥー・入れ墨のある部位、眉毛、髪の毛、日焼けした箇所、やけどしている箇所。

※使用后24時間以内は、なるべく紫外線に当てないでください。
※照射面から出る光は決して近くで直視しないでください。

お使いになる前に(続き)

■お手入れの頻度

•ムダ毛ケア

1. 最初の2カ月間は3日に1回のご使用をおすすめします。

注意 ムダ毛ケアは最初の数回だけではなく、継続的にご使用いただくことで、効果を実感していただけます。

※効果は部位によって個人差があります。

2. 毛の成長に合わせて定期的にご使用ください。毛が濃い場合は、適度に照射レベルや頻度を上げる必要があります。個人の毛の成長に応じて調整してください。

3. 3カ月目以降のお手入れ周期について

①滑らかな肌を維持するには、4～8週間ごとにムダ毛ケアすることをおすすめします。

②体の部位ごとに照射時間とお手入れ周期が異なるため、毛の成長状況を見て判断してください。

ムダ毛ケアモード		
使用する部位	最初の2ヵ月	→ 3ヵ月目以降
ボディ	3日に1回	2週間に1回
VIOゾーン		4～8週間に1回
フェイス(女性)		4～8週間に1回
フェイス(男性) ※ヒゲ	3日に1回	

お使いになる前に(続き)

•美肌ケア

1. 3日に1回のご使用をおすすめします。

継続的にご使用いただくことで、効果を実感していただけます。

※効果は部位によって個人差があります。

美肌ケアモード	
フェイス(男性・女性)	3日に1回

■ご使用ポイント

①ワキのお手入れ

お手入れする前に、ワキにつけている制汗剤や香水、その他化粧品などが残っていない状態にしてください。シワがある部分は指先で伸ばしてご使用ください。

②VIOゾーンのお手入れ

色素沈着や色が黒ずんでいる箇所は照射レベルを下げてご使用ください。製品に体が慣れるまでは照射レベル1でのご使用をおすすめします。

③手と足のお手入れ

関節部分など丸みのある部位はなるべく伸ばし、しっかり照射面を密着させてご使用ください。

お使いになる前に(続き)

■ケアの準備

- お肌のお手入れ箇所を清潔にし、シェーバーで毛を剃った状態でご使用ください。なお、香水、乳液、クリームなどが残っていない状態にしてください。




- 照射面の汚れやホコリ、毛などは必ずきれいに拭きとり、付着物が無いことを確認してから照射してください。付着物が残った状態でのご使用は、肌トラブルや製品の故障・劣化等の原因となります。

■パッチテスト

初めて使用するときや、しばらく使用せず久しぶりにご使用になる場合、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。



電源を ON にし肌色検知した後、電源ボタンを押すたびに照射レベルが切り替わるので、照射レベル 1 からテストをしてください。

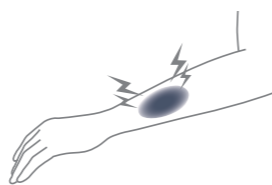

肌に強い痛みや、赤くなった状態が 2 日以上続く場合は使用を中止してください。また、痛みが続く場合は医師にご相談ください。

使いかた

ボタン・操作について


■電源と照射レベル調整

-電源のON/OFF

電源ボタン(ON/OFF)を2秒間長押しすると、電源のON/OFFができます。

-照射レベル調整


電源をONにし肌色検知した後、電源ボタン(ON/OFF)を押すたびに、照射レベルが1-2-3-4-5-6-1-2の順番に切り替わります。

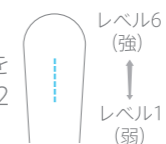

■肌色検知機能

電源を入れた後、肌色検知センサー [ランプ赤] を肌にしっかり当てると、自動的に肌色検知ができ、肌色に合うおすすめの照射レベルが設定されます。
※肌色検知をしないと、電源OFF以外の操作ができません。

肌色検知センサー

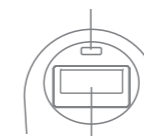

照射口

■モード切替・冷却機能

-モード切替

電源をONにし肌色検知した後、モード切替ボタン(HR SC)を押すたびに、ムダ毛ケアモード(HR)・美肌ケアモード(SC)に切替えることができます。

SCモード：レベル表示ランプ緑色点灯

HRモード：レベル表示ランプ青色点灯

HR SC

ムダ毛ケアモード

※HR点灯

HR SC

美肌ケアモード

※SC点灯

-冷却機能のON/OFF

電源をONにし肌色検知した後、モード切替ボタン(HR SC)を2秒間長押しすると、冷却機能のON/OFFができます。冷却機能OFFの場合、モードに関わらずレベル表示ランプが白色点灯になります。



冷却機能ON



冷却機能OFF

■オート・マニュアル照射機能

電源をONにし肌色検知した後、照射ボタン(ON/OFF)を2秒間長押しすると、オート/マニュアル照射モードの切替ができます。

-オート照射モードの場合、照射ボタン(ON/OFF)は点滅になります。

-マニュアル照射モードの場合、照射ボタン(ON/OFF)は常時点灯になります。



オート照射モード
(点滅)



マニュアル照射モード
(点灯)

使いかた(続き)

■基本的な使いかた

※ 基本的にサングラスの着用は必要ありませんが、照射光が苦手な方はご着用ください。



準備

シェーバーや安全なカミソリで事前に除毛し、毛の長さは1mm以下にしてください。



電源を入れる

ACアダプターを本体に差し込み、電源コードをつなぎ、電源ボタンを2秒間長押しして、電源をONにします。



肌色検知

肌色検知センサーを照射したい肌にあて、肌色検知後、おすすめの照射レベルに設定されます。レベル表示ランプが点灯状態になると、照射ができますようになります。

注意 肌色検知センサーによって肌色検知をしないと、照射できません。



モード切替

モード切替ボタンを押して、ムダ毛ケアモード (HR)・美肌ケアモード (SC)に切り替えができます。

使いかた(続き)



照射レベル調整

2の肌色検知結果に応じてレベルを設定されますが、使用中に電源ボタンを押すと、照射レベルを1~6までお好みで調整できます。




オート / マニュアルモード設定

肌色検知後はマニュアル照射モードになり、肌に当てて側面にある照射ボタンを押すと照射できます。照射ボタンを2秒間長押しすると、オート照射モードに切り替わります。



照射する

使用部位に照射口をしっかり密着させ、押し当ててください。
注意 レベル表示ランプが設定レベルまで点灯している場合は照射できますが、レベル表示ランプが照射レベルまで未到達の場合は照射できません。

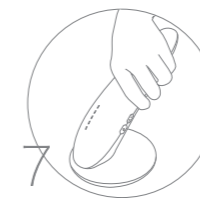

電源を切る

使用后、電源ボタンを2秒間長押しして電源をOFFにします。電源をOFFにすると、消灯後10秒間ファンが回り電源が切れます。本体をクリーンシステムスタンドに置き、オートクリーンにより照射面の清潔さを保ちます。

使い終わったら

- ご使用直後に、香水や刺激性の強い化粧品、スクラブ成分含有の洗顔料・洗浄料・化粧品などをお手入れ部位に使用しないでください。
- ご使用后、24時間程度はなるべく紫外線に当てないでください。外出される場合などは、日焼け止めを活用してください。
- お肌などに異常が発生した場合、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。

※正しい手順で使用していても、お肌の性質や体質によってはトラブルが発生してしまう可能性があります。お肌に異常が発生した場合は、本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

■本製品のメンテナンス

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。

1. 電源を切り、電源プラグを抜いて製品を冷やします。
※照射口は使用中に熱くなります。清掃を行う前に必ず冷やしてください。
2. やわらかい布を少量の水で湿らせ、照射口をきれいに拭きます。
注意 本製品は防水仕様ではありません。製品を濡らさないでください。
3. 汚れの状況に応じて、本体を乾いた布などで丁寧に拭いてください。
4. 本体照射口をスタンドに置いてください。クリーンシステムが自動的に作動します。

※注意事項

- (1) 研磨剤、研磨用洗浄剤、刺激性の薬品などは絶対に使わないでください。
- (2) 電源コードやACアダプターは絶対に濡らさないでください。
- (3) 照射口や肌色検知センサーには、傷が付かないようご注意ください。

よくあるご質問

■電源・機能について

以下を実行しても直らないときは修理を依頼してください。

事例	対処方法
電源が入らない	・電源コードやACアダプターはしっかり接続されていますか？ →コード類を再度接続しなおしてください。
照射できない	・照射口が肌にしっかり押しあてられていますか？ →照射口を肌に密着させ、肌に垂直に押しあてた状態で照射してください。
	・照射口が肌以外にあたっていないか？ →照射口に異物がないことを確認してから、照射してください。
	・肌色検知は完了していますか？ →電源を入れただけでは照射できません。 必ず肌色検知センサーで肌色検知を行ってください。検知後、本体内部のファンが起動し、照射できる状態になります。
本体から音がする	本体に内蔵されているファンの動作音です。 異常ではありません。

よくあるご質問(続き)

■使用方法・肌トラブルについて

肌の反応	対処方法
照射中や照射直後、照射した部位に熱さや痛みを感じる	<ul style="list-style-type: none"> ・使用できない部位に使用していませんか？ →事前に使用禁止部位をご確認ください。(「安全上のご注意」P3-5を参照) ・強すぎる照射レベルに設定していませんか？ →電源/照射レベルボタンを押して照射レベルを下げてください。 ・同じ箇所にも何度も照射していませんか？
照射中や照射後、肌に赤みができる	<p>体質や体調によっては、肌が一時的に赤くなったり痛みが生じることがあります。直ちに使用を中止し、肌を冷却・保湿してください。使用後に肌の赤みが48時間経っても消えない場合、皮膚科の医師に相談してください。</p>
照射直後に、焦げたニオイがする	<ul style="list-style-type: none"> ・照射する部位にムダ毛が残っていませんか？ →照射時のIPL光でムダ毛に熱が加わり、焦げたにおいがする場合があります。しっかり除毛してからご使用ください。 <p>製品本体からニオイがする場合、直ちに使用を中止して本体の電源をOFFにしてください。</p>

稀な肌の反応	対処方法
照射後、腫れや赤みが2~3日たっても消えない	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。
照射中や照射後、明るくなったり、暗くなるなど肌の色が変わる	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。
照射中や照射後、火傷や水疱の反応があらわれる	直ちに使用を中止し、皮膚科の医師に相談してください。

製品仕様

モデル名	SB-IFL01-01、SB-IFL01-02
電源方式	交流式
電源・電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	72W
本体寸法	約W115×D150×H186mm (スタンド含まず)
本体質量	約270g (付属品含まず)
照射回数	約30万回
照射面積	約3.5cm ²
材質	ABS樹脂、サファイアクリスタルなど
付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、クリーンシステムスタンド、使い方ガイド、単4乾電池4本、製品保証延長サービスのご案内(保証書)

保証とアフターサービス

保証期間

保証期間はご購入日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、ご購入の販売店、またはL' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポータ）へお問い合わせください。

保証について

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理規定に基づき対応いたします。

修理を依頼されるときは

- お買い上げになってから1年間は、保証書記載の内容に基づき無償対応いたします。本品と保証書をご持参のうえ、ご購入の販売店、またはL' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポータ）までご依頼ください。
- 保証期間(1年間) が過ぎているとき、保証期間経過後の故障については、ご購入の販売店、またはL' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポータ）までご依頼ください。お客様のご要望により有償対応いたします。

保証書について

保証書はご購入日から1年間、無償修理規程に基づいて無償修理をお約束するものです。保証書は付属品として本製品に同梱しております。保証書は必ず「ご購入日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、取扱説明書やお買い上げ時のレシートとともに大切に保管してください。

※ご記入のない場合は無効となります。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
(消耗品、付属品を除く)
 - (1) 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - (2) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、L' EMBELLIR STELLA BEAUTE（ランベリーステラポータ）へお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - (5) 保証書の提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (7) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - (8) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - (9) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障及び損傷
 - (10) 購入した国・地域以外で使用された場合の故障及び損傷

無償修理規定(続き)

3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
 4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に関するお問い合わせは
L'EMBELLIR STELLA BEAUTE
(ランベリーステラボーテ)まで

TEL 0570-099-901

受付時間 9:00~17:00
(年末年始等特定日除く)

※携帯電話からもご利用いただけます。